



Xive®

Каталог продукции



Универсальность и простота

Уже более десяти лет система имплантатов Xive обладает полным спектром реставрационных вариантов. От крайне узкого промежутка до полной адентии с атрофией, в кости высокой или низкой плотности, с использованием одно- или двухэтапного протокола, с субгингивальным или трансгингивальным заживлением, от немедленной до отложенной нагрузки — с Xive можно выбрать любую концепцию лечения.

Основанием для такой свободы выбора, как хирургической, так и ортопедической, является сочетание ряда выдающихся особенностей, которые обеспечивают универсальность и простоту.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор системы

Ассортимент Xive® D 3.0/D 3.4	4
Ассортимент Xive® D 3.8	6
Ассортимент Xive® D 4.5	8
Ассортимент Xive® D 5.5	10
Ассортимент Xive® TG	12
Рекомендуемые значения торка	14

Имплантаты

Xive® S	18
Xive® TG	20

Ортопедия

Менеджмент мягких тканей	21
Многофункциональный компонент TempBase	21
Формирователь десны	22
Временный абатмент EsthetiCap	25

Xive® S	26
Снятие оттиска на уровне имплантата	27
Снятие оттиска на уровне абатмента (MP)	35
Стандартные ортопедические компоненты	38
• Абатмент EstheticBase	38
• Абатмент Cercon®	41
• Абатмент CeraBase	42
• Абатмент AuroBase	43
• Телескопический абатмент	44
• Абатмент MP	45
• Мостовидные протезы	48
• Набор PassivFit, ретенционные гильзы MP	50
• Балочные конструкции	51
• Абатмент Locator®	54
• Шаровидный абатмент	56
Индивидуальные ортопедические компоненты	57
• Абатменты TitaniumBase и ScanBase	57
• Абатменты Atlantis®	57
Концепция WeldOne®	58

Xive® TG	
Снятие оттиска	60
Стандартные ортопедические компоненты	61
Индивидуальные ортопедические компоненты	63

Инструменты

Компоненты для планирования	64
------------------------------------	----

Хирургические инструменты	
Хирургические наборы	66
Лоток Washtray	70
Хирургические инструменты	72
Инструменты для навигационной хирургии	84
Физиодиспенсер	89

Ортопедические инструменты	91
-----------------------------------	----

Дополнительные материалы	97
---------------------------------	----

Указатель продукции	100
----------------------------	-----

Ассортимент Xive®

D 3.0

D 3.4

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 Имплантат Xive S plus D 3.0 L 11 26 - 2422 L 13 26 - 2423 L 15 26 - 2425	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1120	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1421 GH 2 45 - 1422 GH 3 45 - 1423 GH 5 45 - 1425	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8223 GH 5 46 - 8225  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8123 GH 5 46 - 8125  Аналог имплантата Friadent для фрезерования 45 - 2621  Аналог имплантата Friadent 45 - 4020	 Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2121 GH 2 46 - 2122 GH 3 46 - 2123 GH 5 46 - 2125  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2221 GH 2 46 - 2222 GH 3 46 - 2223 GH 5 46 - 2225
 Имплантат Xive S plus D 3.4 L 9.5 26 - 2431 L 11 26 - 2432 L 13 26 - 2433 L 15 26 - 2435 L 18 26 - 2438	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1130	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1431 GH 2 45 - 1432 GH 3 45 - 1433 GH 5 45 - 1435  Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 - 1232 GH 3 45 - 1233 GH 5 45 - 1235  Формирователь десны Friadent с отверстиями GH 3 45 - 1333 GH 5 45 - 1335	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8233 GH 5 46 - 8235  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8133 GH 5 46 - 8135  Трансфер Friadent тонкий 45 - 1239  Аналог имплантата Friadent для фрезерования 45 - 2631  Аналог имплантата Friadent 45 - 4030	Одиночная коронка  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2131 GH 2 46 - 2132 GH 3 46 - 2133 GH 5 46 - 2135  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2231 GH 2 46 - 2232 GH 3 46 - 2233 GH 5 46 - 2235 Мостовидный протез  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2131 GH 2 46 - 2132 GH 3 46 - 2133 GH 5 46 - 2135  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2231 GH 2 46 - 2232 GH 3 46 - 2233 GH 5 46 - 2235 Перекрывающий протез / протез на балке  Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 - 2831 GH 2 46 - 2832 GH 3 46 - 2833 GH 5 46 - 2835  Абатмент Xive MP угловой A 15 GH 2 46 - 2932 GH 3 46 - 2933 GH 5 46 - 2935 A 30 GH 2 46 - 3032 GH 3 46 - 3033

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для МР)
 Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2420  Телескопический абатмент Friadent 45 - 2620	 Абатменты Atlantis	
 Абатмент Friadent CeraBase конический 45 - 2530  анатомический 45 - 2531  Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2430		
 Абатмент Friadent МР прямой А 0 GH 1 46 - 2831 GH 2 46 - 2832 GH 3 46 - 2833 GH 5 46 - 2835  Абатмент Xive МР угловой А 15 GH 2 46 - 2932 GH 3 46 - 2933 GH 5 46 - 2935  Абатмент Xive МР угловой А 30 GH 2 46 - 3032 GH 3 46 - 3033	 Лаб. набор Friadent МР с отливаемой втулкой для моста 46 - 9530  Лаб. набор Friadent МР с приливаемой втулкой для моста 46 - 9930  Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2430  Набор Friadent PassivFit 45 - 4830	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 - 8230  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 - 8130
 Абатмент Xive Locator GH 1 26 - 3301 GH 2 26 - 3302 GH 3 26 - 3303 GH 4 26 - 3304 GH 5 26 - 3305  Шаровидный абатмент Friadent GH 1 45 - 3131 GH 2 45 - 3132 GH 3 45 - 3133	 Лаб. набор Friadent МР с золотым колпачком для балки 46 - 9630  Лаб. набор Friadent МР с титановым колпачком для балки 46 - 9637  Лаб. набор Friadent МР с отливаемым колпачком для балки 46 - 9638  Телескопический абатмент Friadent 45 - 2630	

Ассортимент Xive®

D 3.8

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 Имплантат Xive S plus D 3.8 L 8 26 - 2440 L 9.5 26 - 2441 L 11 26 - 2442 L 13 26 - 2443 L 15 26 - 2445 L 18 26 - 2448	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1140	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1441 GH 2 45 - 1442 GH 3 45 - 1443 GH 5 45 - 1445	 Лаб. набор для снятия оттиска отпр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8243 GH 5 46 - 8245	Одиночная коронка  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2141 GH 2 46 - 2142 GH 3 46 - 2143 GH 5 46 - 2145  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2241 GH 2 46 - 2242 GH 3 46 - 2243 GH 5 46 - 2245
		 Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 - 1242 GH 3 45 - 1243 GH 5 45 - 1245	 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8143 GH 5 46 - 8145	
		 Формирователь десны Friadent с отверстиями GH 3 45 - 1343 GH 5 45 - 1345	 Трансфер Friadent тонкий 45 - 1249	Перекрывающий протез / протез на балке  Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 - 2841 GH 2 46 - 2842 GH 3 46 - 2843 GH 5 46 - 2845 GH 9 46 - 2849  Абатмент Xive MP угловой A 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 A 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043
Переключение платформ	 Винт-заглушка Xive PS D 3.4 45 - 1110	 Формирователь десны Xive PS GH 1 45 - 1531 GH 2 45 - 1532 GH 3 45 - 1533 GH 5 45 - 1535	 Трансфер Xive PS для открытой ложки GH 3 45 - 1835 GH 5 45 - 1832	Переключение платформ  Абатмент Xive EstheticBase PS прямой A 0 GH 1 46 - 2331 GH 2 46 - 2332 GH 3 46 - 2333 GH 5 46 - 2335  Абатмент Xive EstheticBase PS угловой A 15 GH 1 46 - 2431 GH 2 46 - 2432 GH 3 46 - 2433 GH 5 46 - 2435
		 Формирователь десны Xive PS тонкий GH 2 45 - 1222 GH 3 45 - 1223 GH 5 45 - 1225	 Трансфер Xive PS для закрытой ложки GH 3 45 - 1830 GH 5 45 - 1831  Трансфер Xive PS тонкий 45 - 1238	

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для МР)
Абатмент Friadent Cercon прямой А 0 GH 1, neutral 47 - 1141 GH 2, neutral 47 - 1142 GH 1, dentine 47 - 2141 GH2, dentine 47 - 2142 Абатмент Friadent Cercon угловой А 15 GH 1, neutral 47 - 1241 GH 2, neutral 47 - 1242 GH 1, dentine 47 - 2241 GH 2, dentine 47 - 2242 Абатмент Friadent CeraBase конический 45 - 2540 анатомический 45 - 2541 Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2440		
Абатмент Friadent МР прямой А 0 GH 1 46 - 2841 GH 2 46 - 2842 GH 3 46 - 2843 GH 5 46 - 2845 GH 9 46 - 2849 Абатмент Xive МР угловой А 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 А 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043 Лаб. набор Friadent МР с отливаемой втулкой для моста 46 - 9540 Лаб. набор Friadent МР с приливаемой втулкой для моста 46 - 9940 Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2440 Набор Friadent PassivFit 45 - 4840	Абатмент Xive TitaniumBase 27 - 9040 Абатмент Xive ScanBase 27 - 9140 Абатменты Atlantis для Xive Супра-структуры Atlantis для Xive	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 - 8240 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 - 8140
Абатмент Xive Locator GH 1 26 - 3311 GH 2 26 - 3312 GH 3 26 - 3313 GH 4 26 - 3314 GH 5 26 - 3315 Шаровидный абатмент Friadent GH 1 45 - 3141 GH 2 45 - 3142 GH 3 45 - 3143 GH 5 45 - 3145 Лаб. набор Friadent МР с золотым колпачком для балки 46 - 9640 Лаб. набор Friadent МР с титановым колпачком для балки 46 - 9647 Лаб. набор Friadent МР с отливаемым колпачком для балки 46 - 9648 Телескопический абатмент Friadent 45 - 2640		Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 - 8240 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 - 8140
Абатмент Xive МР PS GH 1 46 - 2921 GH 2 46 - 2922 GH 3 46 - 2923 GH 5 46 - 2925		Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 - 8240 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 - 8140

Ассортимент Xive®

D 4.5

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 Имплантат Xive S plus D 4.5 L 8 26 - 2450 L 9.5 26 - 2451 L 11 26 - 2452 L 13 26 - 2453 L 15 26 - 2455 L 18 26 - 2458	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1150	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1451 GH 2 45 - 1452 GH 3 45 - 1453 GH 5 45 - 1455	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8253 GH 5 46 - 8255	Одиночная коронка  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2151 GH 2 46 - 2152 GH 3 46 - 2153 GH 5 46 - 2155  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2251 GH 2 46 - 2252 GH 3 46 - 2253 GH 5 46 - 2255
		 Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 - 1252 GH 3 45 - 1253 GH 5 45 - 1255	 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8153 GH 5 46 - 8155	Мостовидный протез  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2151 GH 2 46 - 2152 GH 3 46 - 2153 GH 5 46 - 2155  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2251 GH 2 46 - 2252 GH 3 46 - 2253 GH 5 46 - 2255
		 Формирователь десны Friadent с отверстиями GH 3 45 - 1353 GH 5 45 - 1355	 Трансфер Friadent тонкий 45 - 1259	Переключающий протез / протез на балке  Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 - 2851 GH 2 46 - 2852 GH 3 46 - 2853 GH 5 46 - 2855 GH 9 46 - 2859  Абатмент Xive MP угловой A 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 A 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043
Переключение платформ Параметры внутреннего шестигранного соединения у имплантатов Xive D 4.5 и D 3.8 одинаковы. Вы можете устанавливать абатменты D 3.8 на имплантаты Xive D 4.5 для переключения платформ. Подробная информация изложена в брошюре «Переключение платформ» и в Руководстве по ортопедии Xive.	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1140	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1441 GH 2 45 - 1442 GH 3 45 - 1443 GH 5 45 - 1445	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8243 GH 5 46 - 8245	Переключение платформ  Абатмент Friadent EstheticBase прямой GH 1 46 - 2141 GH 2 46 - 2142 GH 3 46 - 2143 GH 5 46 - 2145
		 Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 - 1242 GH 3 45 - 1243 GH 5 45 - 1245	 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8143 GH 5 46 - 8145	 Абатмент Friadent EstheticBase угловой GH 1 46 - 2241 GH 2 46 - 2242 GH 3 46 - 2243 GH 5 46 - 2245
			 Трансфер Friadent тонкий 45 - 1249	

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для МР)
Абатмент Friadent Cercon прямой A 0 GH 1, neutral 47 - 1151 GH 2, neutral 47 - 1152 GH 1, dentine 47 - 2151 GH 2, dentine 47 - 2152 Абатмент Friadent Cercon угловой A 15 GH 1, neutral 47 - 1251 GH 2, neutral 47 - 1252 GH 1, dentine 47 - 2251 GH 2, dentine 47 - 2252 Абатмент Friadent CeraBase конический 45 - 2550 анатомический 45 - 2551 Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2450		
Абатмент Friadent МР прямой A 0 GH 1 46 - 2851 GH 2 46 - 2852 GH 3 46 - 2853 GH 5 46 - 2855 GH 9 46 - 2859 Абатмент Xive МР угловой A 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 Абатмент Xive МР угловой A 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043 Лаб. набор Friadent МР с отливаемой втулкой для моста 46 - 9550 Лаб. набор Friadent МР с приливаемой втулкой для моста 46 - 9950 Абатмент Friadent AuroBase 45 - 2450 Набор Friadent PassivFit 45 - 4850	Абатмент Xive TitaniumBase 27 - 9050 Абатмент Xive ScanBase 27 - 9150 Абатменты Atlantis для Xive Супра-структуры Atlantis для Xive	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 - 8250 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 - 8150
Абатмент Xive Locator GH 1 26 - 3321 GH 2 26 - 3322 GH 3 26 - 3323 GH 4 26 - 3324 GH 5 26 - 3325 Шаровидный абатмент Friadent GH 1 45 - 3151 GH 2 45 - 3152 GH 3 45 - 3153 GH 5 45 - 3155 Лаб. набор Friadent МР с золотым колпачком для балки 46 - 9650 Лаб. набор Friadent МР с титановым колпачком для балки 46 - 9657 Лаб. набор Friadent МР с отливаемым колпачком для балки 46 - 9658 Телескопический абатмент Friadent 45 - 2650		Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР D 3.8 46 - 8240 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР D 3.8 46 - 8140
Абатмент Friadent МР прямой A 0 GH 1 46 - 2841 GH 2 46 - 2842 GH 3 46 - 2843 GH 5 46 - 2845 GH 9 46 - 2849 Абатмент Xive МР угловой D 3.8 - D 5.5 A 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 Абатмент Xive МР угловой D 3.8 - D 5.5 A 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043		Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР D 3.8 46 - 8240 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР D 3.8 46 - 8140

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 Имплантат Xive S plus D 5.5 L 8 26 - 2460 L 9.5 26 - 2461 L 11 26 - 2462 L 13 26 - 2463 L 15 26 - 2465	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1160	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1461 GH 2 45 - 1462 GH 3 45 - 1463 GH 5 45 - 1465	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8263 GH 5 46 - 8265	Одиночная коронка Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2161 GH 2 46 - 2162 GH 3 46 - 2163 GH 5 46 - 2165 Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2261 GH 2 46 - 2262 GH 3 46 - 2263 GH 5 46 - 2265
		 Формирователь десны Friadent с отверстиями GH 3 45 - 1363 GH 5 45 - 1365	 Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8163 GH 5 46 - 8165	Мостовидный протез Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 - 2161 GH 2 46 - 2162 GH 3 46 - 2163 GH 5 46 - 2165 Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 - 2261 GH 2 46 - 2262 GH 3 46 - 2263 GH 5 46 - 2265
			 Аналог имплантата Friadent для фрезерования 45 - 2661  Аналог имплантата Friadent 45 - 4060	Перекрывающий протез / протез на балке Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 - 2861 GH 2 46 - 2862 GH 3 46 - 2863 GH 5 46 - 2865 Абатмент Xive MP угловой A 15 GH 2 46 - 2942 GH 3 46 - 2943 GH 5 46 - 2945 A 30 GH 2 46 - 3042 GH 3 46 - 3043
Переключение платформ Параметры внутреннего шестигранного соединения у имплантатов Xive D 5.5, D 4.5 и D 3.8 одинаковы. Вы можете устанавливать абатменты D 3.8 и D 4.5 на имплантаты Xive D 5.5 для переключения платформ. Подробная информация изложена в брошюре «Переключение платформ» и в Руководстве по ортопедии Xive.	 Винт-заглушка Friadent 45 - 1150	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 - 1451 GH 2 45 - 1452 GH 3 45 - 1453 GH 5 45 - 1455  Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 - 1252 GH 3 45 - 1253 GH 5 45 - 1255	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8253 GH 5 46 - 8255  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 - 8153 GH 5 46 - 8155 Трансфер Friadent тонкий 45 - 1259	Переключение платформ Абатмент Friadent EstheticBase прямой GH 1 46 - 2151 GH 2 46 - 2152 GH 3 46 - 2153 GH 5 46 - 2155 Абатмент Friadent EstheticBase угловой GH 1 46 - 2251 GH 2 46 - 2252 GH 3 46 - 2253 GH 5 46 - 2255

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для МР)
 Абатмент Friadent CeraBase конический 45 – 2560  анатомический 45 – 2561  Абатмент Friadent AuroBase 45 – 2460		
 Абатмент Friadent МР прямой А 0 GH 1 46 – 2861 GH 2 46 – 2862 GH 3 46 – 2863 GH 5 46 – 2865  Абатмент Xive МР угловой А 15 GH 2 46 – 2942 GH 3 46 – 2943 GH 5 46 – 2945  А 30 GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 3043  Лаб. набор Friadent МР с отливаемой втулкой для моста 46 – 9560  Лаб. набор Friadent МР с приливаемой втулкой для моста 46 – 9960  Абатмент Friadent AuroBase 45 – 2460  Набор Friadent PassivFit 45 – 4860	 Абатмент Xive TitaniumBase 27 – 9060  Абатмент Xive ScanBase 27 – 9160  Абатменты Atlantis для Xive	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР 46 – 8260  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР 46 – 8160
 Абатмент Xive Locator GH 1 26 – 3331 GH 2 26 – 3332 GH 3 26 – 3333 GH 4 26 – 3334 GH 5 26 – 3335  Шаровидный абатмент Friadent GH 1 45 – 3161 GH 2 45 – 3162 GH 3 45 – 3163 GH 5 45 – 3165  Лаб. набор Friadent МР с золотым колпачком для балки 46 – 9660  Лаб. набор Friadent МР с титановым колпачком для балки 46 – 9667  Лаб. набор Friadent МР с отливаемым колпачком для балки 46 – 9668  Телескопический абатмент Friadent 45 – 2660	 Супраструктуры Atlantis для Xive	
 Абатмент Friadent МР прямой А 0 GH 1 46 – 2851 GH 2 46 – 2852 GH 3 46 – 2853 GH 5 46 – 2855 GH 9 46 – 2859  Абатмент Xive МР угловой D 3.8 – D 5.5  А 15 GH 2 46 – 2942 GH 3 46 – 2943 GH 5 46 – 2945  А 30 GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 3043		 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent МР D 4.5 46 – 8250  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent МР D 4.5 46 – 8150

Ассортимент Xive® TG

Имплантаты	Винт-заглушка	Оттиски
 Имплантат Xive TG plus D 3.4 L 9.5 25 - 2431 L 11 25 - 2432 L 13 25 - 2433 L 15 25 - 2435		
 Имплантат Xive TG plus D 3.8 L 8 25 - 2440 L 9.5 25 - 2441 L 11 25 - 2442 L 13 25 - 2443 L 15 25 - 2445	 Винт-заглушка Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 1400	 Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 4010
 Имплантат Xive TG plus D 4.5 L 8 25 - 2450 L 9.5 25 - 2451 L 11 25 - 2452 L 13 25 - 2453 L 15 25 - 2455		

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные балочные конструкции и мостовидные протезы
Одиночная коронка / мостовидный протез Абатмент Xive TG, прямой / A 0 D 3.4 - D 4.5 25 - 4500 Набор Friadent PassivFit D 3.8 45 - 4840 Абатмент Xive TG, угловой / A 15 D 3.4 - D 4.5 25 - 4510 Отливаемый колпачок Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 4245 Абатмент Xive TG AuroBase D 3.4 - D 4.5 25 - 4520 Приливаемый колпачок Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 4246 Супраструктуры Atlantis для Xive TG	
Перекрывающий протез / протез на балке Лабораторный набор с золотым колпачком для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 9600 Аттачмент Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 4401 Лабораторный набор с титановым колпачком для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 9700 Лабораторный набор с отливаемым колпачком для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5 25 - 9800 Супраструктуры Atlantis для Xive TG	

Рекомендуемые значения торка

Ортопедические компоненты

Торк

Винт-заглушка Friadent,
винт-заглушка Xive TG
и винт-заглушка Xive PS D 3.4



макс. 14 Нсм

Формирователь десны Friadent
и формирователь десны Xive PS



14 Нсм

Временный абатмент Friadent EsthetiCap



14 Нсм

Ортопедические компоненты


Торк

Абатменты Friadent EstheticBase
и Xive EstheticBase PS прямые / А 0 и угловые / А 15



24 Нсм

Абатмент Friadent AuroBase

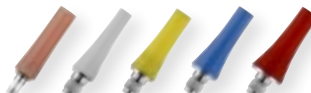

24 Нсм

Телескопический абатмент Friadent



24 Нсм

Абатмент Friadent CeraBase



24 Нсм

Абатмент Friadent Cercon
прямой / А 0 и угловой / А 15



24 Нсм

Абатмент Atlantis



24 Нсм



Ручная шестигранная отвертка Friadent
14 Нсм
Ширина 0,9 мм
Арт. 45 – 5732 короткая
Арт. 45 – 5733 длинная (не показана)



Ручная шестигранная отвертка Friadent
24 Нсм
Ширина 1,22 мм
Арт. 45 – 5734 короткая
Арт. 45 – 5736 длинная (не показана)

Ортопедические компоненты

Торк

Абатменты Xive TitaniumBase
и Xive ScanBase

24 Нсм

Шаровидный абатмент Friadent




24 Нсм


Набор Friadent PassivFit



24 Нсм

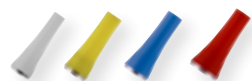Приливаемые втулки
Friadent Xive MP и Xive TG

24 Нсм

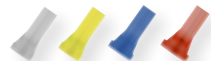Отливаемые втулки
Friadent Xive MP и Xive TG

24 Нсм

Все балочные колпачки Friadent и Xive TG



24 Нсм

Ортопедические компоненты

Торк

Абатменты Friadent MP прямые и угловые, абатмент
Xive MP PS

24 Нсм

Абатмент Xive Locator



30 Нсм



Ручная шестигранная отвертка Friadent
24 Нсм
Ширина 1,22 мм
Арт. 45 - 5734 короткая
Арт. 45 - 5736 длинная (не показана)



1 | Насадка для ключа-трещотки
Friadent для платформы MP
абатмента 24 Нсм
Арт. 46 - 5610
2 | ВСТАВКА FRIADENT Locator
для ортопедического ключа-
трещотки 30 Нсм
Арт. 45 - 3344

Упаковка имплантата

Все имплантаты Xive поставляются в двойной стерильной блистерной упаковке, помещенной в картонную коробку. Такой тип упаковки гарантирует максимальную защищенность медицинского изделия в соответствии со строгими современными нормативами. Кроме того, эта форма упаковки эргономична в использовании, облегчает хранение и извлечение имплантата.



Внешняя упаковка

- Простая идентификация продукта благодаря бренд-специфичному дизайну, прозрачному окошку и цветовой маркировке диаметра имплантата
- Крупная наклейка с подробной информацией о продукте
- При складировании вся важная информация остается видна
- Инструкция по использованию на нескольких языках



Прозрачный внешний блистер

- Внешний стерильный блистер упаковки имплантата



Прозрачный внутренний блистер

- Внутренняя стерильная упаковка
- Содержит вкладыш с имплантатом и винт-заглушку
- Отрывная наклейка с номером партии для четкой документации при лечении



Пластмассовый вкладыш с имплантатом

- Надежно удерживает имплантат в упаковке и защищает его от повреждений в процессе транспортировки и извлечения из упаковки
- Обеспечивает простой бесконтактный захват и извлечение имплантата
- Имеет три крыла с шероховатой нескользящей поверхностью для простого и безопасного извлечения имплантата

Имплантаты

Xive S

Xive упрощает достижение идеальной первичной стабильности в кости любой плотности. ActiveBoneControl — комбинация инновационного дизайна резьбы имплантата и особого протокола формирования ложа — позволяет добиваться нужных результатов с Xive S даже в кости неоптимального качества. Каждый имплантат Xive S комплектуется держателем TempBase, который можно использовать в качестве временного абатмента, поэтому сразу же после операции можно с минимальными затратами изготовить высококачественный эстетичный и функциональный временный протез.



Xive TG

Первичная стабильность трансгингивальных имплантатов Xive TG достигается в кости любой плотности. ActiveBoneControl — комбинация инновационного дизайна резьбы имплантата и особого протокола формирования ложа — позволяет добиваться нужных результатов с Xive TG даже в кости неоптимального качества. Имплантаты Xive TG подходят для протезирования при полной адентии с изготовлением протеза на балке с опорой на 4 имплантата или мостовидного протеза с винтовой фиксацией на 6 или более имплантатах, а также для замещения одиночных включенных или концевых дефектов.



Внутренний блистер (стерильный)
Вкладыш с имплантатом Xive
Винт-заглушка для имплантатов



Friadent TempBase (предустановлен)
Имплантат Xive
Вкладыш

Имплантаты Xive® S plus

Винт-заглушка Friadent²

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.0

Ø



D 3.0

Арт.

45 – 1120

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.4

Ø



D 3.4

Арт.

45 – 1130

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø



D 3.8

Арт.

45 – 1140

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 4.5 D 5.5

Ø



D 4.5

Арт.

45 – 1150

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 5.5

Ø



D 5.5

Арт.

45 – 1160

Винт-заглушка Xive PS D 3.4

- Первичное переключение платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5.
- Переключение платформ следует начинать не с формирователя десны или абатмента, а с винта-заглушки. Это способствует достижению клинического успеха.

Винт-заглушку Xive PS D 3.4 необходимо заказывать отдельно.

Винт-заглушка Xive PS D 3.4

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.8 D 4.5

Ø



D 3.4

Арт.

45 – 1110

Имплантат Xive S plus

Масштаб 1:1

Ø  D 3.0  D 3.0  D 3.0

Длина Арт.	11 мм 26 - 2422	13 мм 26 - 2423	15 мм 26 - 2425
------------	--------------------	--------------------	--------------------

Масштаб 1:1

Ø  D 3.4  D 3.4  D 3.4  D 3.4  D 3.4

Длина Арт.	9,5 мм 26 - 2431	11 мм 26 - 2432	13 мм 26 - 2433	15 мм 26 - 2435	18 мм 26 - 2438
------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Масштаб 1:1

Ø  D 3.8  D 3.8  D 3.8  D 3.8  D 3.8  D 3.8

Длина Арт.	8 мм 26 - 2440	9,5 мм 26 - 2441	11 мм 26 - 2442	13 мм 26 - 2443	15 мм 26 - 2445	18 мм 26 - 2448
------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Масштаб 1:1

Ø  D 4.5  D 4.5  D 4.5  D 4.5  D 4.5  D 4.5

Длина Арт.	8 мм 26 - 2450	9,5 мм 26 - 2451	11 мм 26 - 2452	13 мм 26 - 2453	15 мм 26 - 2455	18 мм 26 - 2458
------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Масштаб 1:1

Ø  D 5.5  D 5.5  D 5.5  D 5.5  D 5.5

Длина Арт.	8 мм 26 - 2460	9,5 мм 26 - 2461	11 мм 26 - 2462	13 мм 26 - 2463	15 мм 26 - 2465
------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Имплантат Xive S plus (стерильный)

Комплектация: имплантат², TempBase⁴, винт-заглушка²

Показания к применению Xive D 3.4 – 5.5

- Замещение одного зуба
- Немедленное протезирование при адекватной первичной стабильности имплантатов
- Одиночные реставрации, мостовидные и съемные протезы

Показания к применению Xive D 3.0

- Одиночные реставрации во фронтальном отделе 12 + 22 и 32 - 42
- Объединенные одиночные реставрации во фронтальном отделе 32 - 42
- Нефункциональная немедленная нагрузка

Вид заживления

- Закрытое или открытое с формирователем десны или временным протезом

Упаковка имплантата

- Все имплантаты Xive поставляются в двойной стерильной упаковке (см. стр. 16).

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка имплантата:

Имплантовод Xive (стр. 81)

Раскручивание винта TempBase, фиксация винта-заглушки:

Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм (стр. 81)

Имплантаты Xive® TG plus

Имплантат Xive TG plus (стерильный)

Комплектация: имплантат³,
установочная головка

Показания

- Замещение одного зуба
- Опора для мостовидных и съемных протезов

Вид заживления

- Открытое с формирователем десны или временным протезом

Имплантат Xive TG plus

Масштаб 1:1

				
Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Длина Арт.	9,5 мм 25 - 2431	11 мм 25 - 2432	13 мм 25 - 2433	15 мм 25 - 2435

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка имплантата:

Имплантовод Xive для имплантатов
Xive S D 3.4 и TempBase (стр. 81)

Раскручивание винта адаптера, фиксация винта-заглушки:

Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм
(стр. 81)

Масштаб 1:1

					
Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Длина Арт.	8 мм 25 - 2440	9,5 мм 25 - 2441	11 мм 25 - 2442	13 мм 25 - 2443	15 мм 25 - 2445

Масштаб 1:1

					
Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Длина Арт.	8 мм 25 - 2450	9,5 мм 25 - 2451	11 мм 25 - 2452	13 мм 25 - 2453	15 мм 25 - 2455

Винт-заглушка Xive TG²


Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

  	Арт.	25 - 1400
---	------	-----------


Многофункциональность: концепция TempBase 3 в 1

Многофункциональный компонент TempBase предустановлен на всех имплантатах Xive S plus и служит в первую очередь установочной головкой имплантата. TempBase можно впоследствии использовать в качестве временного абатмента, даже не снимая его с имплантата. Это позволит изготовить временную реставрацию без дополнительных расходов и без лишней травмы окружающих тканей. Стандартный колпачок TempBase Cap, который защелкивается на TempBase, дает возможность изготовить временный протез (внешне очень похожий на будущий постоянный) быстро и просто, не прибегая к помощи лаборатории, и сдать его пациенту в день операции максимум на 3 месяца (нефункциональное немедленное протезирование). Второй хирургический этап в виде раскрытия имплантата при этом отсутствует.


Если планируется двухэтапная имплантологическая операция, то сразу после установки имплантата можно снять оттиск, используя TempBase. На основе этого оттиска зубной техник сможет изготовить точно сидящий временный протез высокого качества, который будет зафиксирован на имплантатах в момент их раскрытия на втором хирургическом этапе.

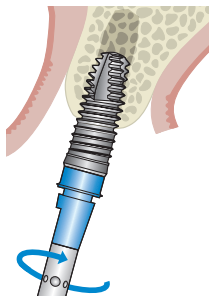


TempBase — установочная головка

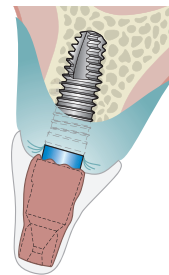

TempBase — трансфер для индексационного оттиска

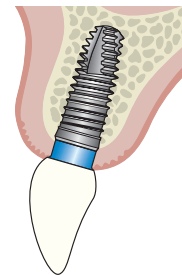

TempBase — основа временной реставрации

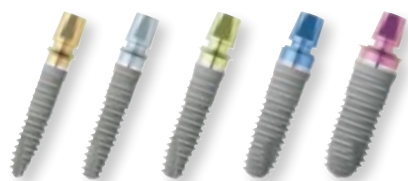

Friadent TempBase⁴ с винтом TempBase

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.0 D 3.4 D 3.8 D 4.5 D 5.5

Арт. 46 - 1220 46 - 1230 46 - 1240 46 - 1250 46 - 1260

Колпачок Friadent TempBase Cap²⁸

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.0 - D 3.8 D 4.5 D 5.5

Арт. 46 - 1235 46 - 1255 46 - 1265

Винт Friadent TempBase⁴

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.0 D 3.4 - D 5.5

Арт. 46 - 1279 46 - 1280

Friadent TempBase

- Держатель имплантата и установочная головка

Friadent TempBase с TempBase Cap

- Трансфер для снятия индексационного оттиска после имплантации
- Основа для изготовления временной реставрации

Friadent TempBase предустановлен на имплантате. Friadent TempBase Cap необходимо заказывать отдельно.


ИНСТРУМЕНТЫ

Раскручивание и фиксация винта TempBase, фиксация винта-заглушки:
Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм (стр. 81)

Формирователь десны

Формирователь десны Friadent

- Простое формирование контура мягких тканей вокруг имплантата
- Подбор формирователя по диаметру имплантата (D) и высоте десны (GH)

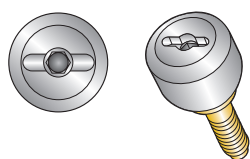

Примечание.

Формирователи десны высотой GH 1 не имеют дополнительного шлица.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация формирователя десны:

Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Формирователь десны Friadent²

Для имплантатов Ø

D 3.0

Масштаб 1,2:1

Ø Высота десны

D 3.0 GH 1

D 3.0 GH 2

D 3.0 GH 3

D 3.0 GH 5

Арт.

45 - 1421

45 - 1422

45 - 1423

45 - 1425

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø Высота десны

D 3.4 GH 1

D 3.4 GH 2

D 3.4 GH 3

D 3.4 GH 5

Арт.

45 - 1431

45 - 1432

45 - 1433

45 - 1435

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø Высота десны

D 3.8 GH 1

D 3.8 GH 2

D 3.8 GH 3

D 3.8 GH 5

Арт.

45 - 1441

45 - 1442

45 - 1443

45 - 1445

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø Высота десны

D 4.5 GH 1

D 4.5 GH 2

D 4.5 GH 3

D 4.5 GH 5

Арт.

45 - 1451

45 - 1452

45 - 1453

45 - 1455

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø Высота десны

D 5.5 GH 1

D 5.5 GH 2

D 5.5 GH 3

D 5.5 GH 5

Арт.

45 - 1461

45 - 1462

45 - 1463

45 - 1465

Менеджмент мягких тканей

Формирователь десны Friadent² тонкий


Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	45 - 1232	45 - 1233	45 - 1235

Формирователь десны Friadent тонкий

- Формирование идеального контура мягких тканей в условиях мезио-дистально ограниченного пространства
- Для снятия оттиска используется тонкий трансфер (стр. 31)

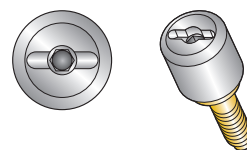

Для снятия оттиска используйте тонкий трансфер Friadent.

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны	GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	45 - 1242	45 - 1243	45 - 1245

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны	GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	45 - 1252	45 - 1253	45 - 1255

Формирователь десны Xive PS

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	45 - 1531	45 - 1532	45 - 1533	45 - 1535

Формирователь десны Xive PS

- Формирование контура мягких тканей в случаях, когда планируется установить на имплантате абатмент меньшего диаметра (концепция переключения платформ)
- Обеспечивает долгосрочное поддержание достигнутого эстетического результата

Формирователь десны Xive PS тонкий

Для имплантатов Ø


Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	45 - 1222	45 - 1223	45 - 1225

Формирователь десны

Формирователь десны Friadent с отверстиями

- Для простого закрепления шовной нити, что упрощает работу с мягкими тканями и делает ее более предсказуемой

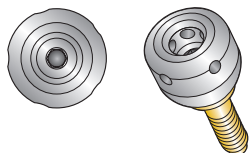

Формирователь десны Friadent² с отверстиями

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.4
GH 3



D 3.4
GH 5

Арт.

45 - 1333

45 - 1335

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.8
GH 3



D 3.8
GH 5

Арт.

45 - 1343

45 - 1345

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 4.5
GH 3



D 4.5
GH 5

Арт.

45 - 1353

45 - 1355

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 5.5
GH 3



D 5.5
GH 5

Арт.

45 - 1363

45 - 1365

Менеджмент мягких тканей

Временный абатмент EsthetiCap

Friadent EsthetiCap^{24/32} с винтом для EsthetiCap

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø

D 3.4



D 3.4
овальный

Арт.

46 - 1730

Временный абатмент Friadent EsthetiCap

- Для изготовления высокоэстетичных временных коронок и мостовидных протезов
- Две анатомические формы поперечного сечения: овальная и треугольная
- Можно индивидуализировать путем шлифования или наложения материала
- Можно цементировать
- Рентгеноконтрастен (содержит диоксид циркония)

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта EsthetiCap:

Шестигранная отвертка
Friadent 0,9 мм (стр. 93)

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5



D 3.8
овальный



D 3.8
треугольный

Арт.

46 - 1740

46 - 1745

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø

D 4.5 D 5.5



D 4.5
овальный



D 4.5
треугольный

Арт.

46 - 1750

46 - 1755

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø

D 5.5



D 5.5
овальный



D 5.5
треугольный

Арт.

46 - 1760

46 - 1765

Универсальные и простые в использовании ортопедические компоненты

Xive так же индивидуален, как клинические ситуации. Вот уже более двух десятилетий врачи-ортопеды и зубные техники работают с абатментами Xive. Вне зависимости от того, планируете ли вы изготовить коронку, мостовидный или съемный протез, ассортимент стандартных и индивидуализируемых ортопедических компонентов настолько широк, что позволяет предложить пациенту любые решения как стандартного, так и премиум класса даже в самых сложных клинических условиях. Присмотритесь, и вы поймете, что отличает имплантационную систему Xive от других.

Ключевой особенностью дизайна Xive является скошенная структурно-полированная шейка имплантата с встроенным переключением платформ. Такой дизайн положительно сказывается на состоянии тканей вокруг имплантата, особенно при установке на имплантате абатмента меньшего диаметра. Для достижения успеха с концепцией переключения платформ крайне важно, чтобы все компоненты, последовательно сменяющиеся на имплантате, были уменьшенного диаметра, начиная с винта-заглушки. Все необходимые компоненты имеются в ортопедическом ассортименте Xive. Рядом с каждым артикулом указаны компоненты, которые потребуются для реализации концепции переключения платформ.



Снятие оттиска на уровне имплантата

Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Ø	Высота десны	Арт.	46 - 8223	46 - 8225
D 3.0						


Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent

Комплектация: трансфер, длинный винт (D 3.0 с длинным винтом D 3.0), оттисковой колпачок Friadent и аналог имплантата.

Трансфер Friadent

- Для переноса расположения имплантата на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек

Трансфер GH 3 используется при толщине десны ≤ 3 мм. Если толщина десны больше 3 мм, используйте трансфер GH 5.

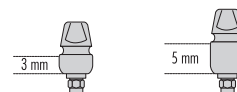

GH 3 GH 5
Головка трансфера уплощена с двух сторон.

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Ø	Высота десны	Арт.	46 - 8233	46 - 8235
D 3.4						

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Ø	Высота десны	Арт.	46 - 8243	46 - 8245
D 3.8 D 4.5 D 5.5						

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Ø	Высота десны	Арт.	46 - 8253	46 - 8255
D 4.5 D 5.5						

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Ø	Высота десны	Арт.	46 - 8263	46 - 8265
D 5.5						

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта, а также стандартного винта абатмента и D 3.0:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (D 3.4 - D 5.5) (стр. 93)

Снятие оттиска на уровне имплантата

НАБОРЫ

Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent

Комплектация: трансфер,
стандартный винт (D 3.0 со
стандартным винтом D 3.0),
оттисочный колпачок Friadent
и аналог имплантата.


Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent

Для имплантатов Ø


D 3.0

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны

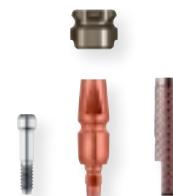

D 3.0
GH 3

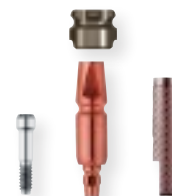

D 3.0
GH 5

Арт.

46 - 8123


46 - 8125

Для имплантатов Ø


D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны

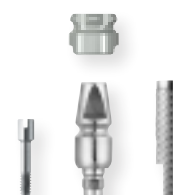

D 3.4
GH 3

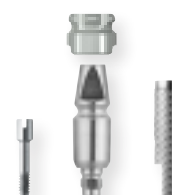

D 3.4
GH 5

Арт.

46 - 8133

46 - 8135

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.8
GH 3



D 3.8
GH 5

Арт.

46 - 8143

46 - 8145

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 4.5
GH 3



D 4.5
GH 5

Арт.

46 - 8153

46 - 8155

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 5.5
GH 3



D 5.5
GH 5

Арт.

46 - 8163

46 - 8165


Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трансфер Friadent (для открытой ложки)


Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø
Высота десны

D 3.0

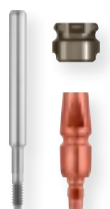D 3.0
GH 3²

Арт.

45 - 1625

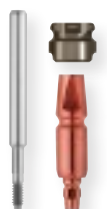D 3.0
GH 5²

45 - 1622

Трансфер Friadent (для открытой ложки)

С длинным винтом (D 3.0 с длинным винтом D 3.0) и оттискным колпачком Friadent

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта, а также стандартного винта абатмента и D 3.0:

Шестигранная отвертка Friadent
1,22 мм или шлицевая отвертка
Friadent 2,0 мм (D 3.4 - D 5.5)
(стр. 93)

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø
Высота десны

D 3.4

D 3.4
GH 3²

Арт.


45 - 1635

D 3.4
GH 5²

45 - 1632

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø
Высота десны

D 3.8 D 4.5 D 5.5

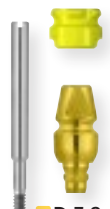D 3.8
GH 3²

Арт.

45 - 1645

D 3.8
GH 5²

45 - 1642

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø
Высота десны

D 4.5 D 5.5

D 4.5
GH 3²

Арт.

45 - 1655

D 4.5
GH 5²

45 - 1652

Для имплантатов Ø
Масштаб 1,2:1
Ø
Высота десны

D 5.5

D 5.5
GH 3²

Арт.

45 - 1665

D 5.5
GH 5²

45 - 1662

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Оттисковый трансфер Friadent (метод закрытой ложки)

со стандартным винтом (D 3.0
со стандартным винтом D 3.0)
и оттискным колпачком Friadent

Оттисковый трансфер Friadent (метод закрытой ложки)

Для имплантатов Ø


D 3.0

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.0
GH 3^{2,4,20}

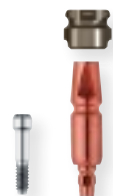

D 3.0
GH 5^{2,4,20}

Арт.

45 - 1620

45 - 1621

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.4
GH 3^{2,4,20}



D 3.4
GH 5^{2,4,20}

Арт.

45 - 1630

45 - 1631

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 3.8
GH 3^{2,4,20}



D 3.8
GH 5^{2,4,20}

Арт.

45 - 1640

45 - 1641

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 4.5
GH 3^{2,4,20}



D 4.5
GH 5^{2,4,20}

Арт.

45 - 1650

45 - 1651

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø
Высота десны



D 5.5
GH 3^{2,4,20}



D 5.5
GH 5^{2,4,20}

Арт.

45 - 1660

45 - 1661

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трансфер Friadent тонкий² (без винта)

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.4

Арт.

45 - 1239

Трансфер Friadent базовый² (с длинным винтом⁴)



D 3.4

46 - 1632

Трансфер Friadent тонкий²

- В условиях мезио-дистально ограниченного пространства
- Для снятия слепков после тонкого формирователя десны (стр. 23)

Примечание.

Длинный винт для открытой ложки и стандартный винт необходимо заказывать отдельно (стр. 32)

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.8

Арт.

45 - 1249



D 3.8

46 - 1642

Трансфер Friadent базовый

- Упрощает снятие оттиска при расхождении осей имплантатов

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

D 4.5

Арт.

45 - 1259



D 4.5

46 - 1652

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

Арт.



D 5.5

46 - 1662

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Длинный винт трансфера Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

Ø



■ D 3.0



■ ■ ■ ■ D 3.4 - D 5.5

Арт.

46 - 1605

45 - 1615

Стандартный винт абатмента Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

Ø



■ D 3.0



■ ■ ■ ■ D 3.4 - D 5.5

Арт.

46 - 4304

45 - 4305

Оттисковый колпачок Friadent

- Обеспечивает максимальную точность при снятии оттиска
- Входит в комплект поставки трансферов для открытой и закрытой ложек

Набор оттисковых колпачков Friadent²⁰ (3 шт.)

Масштаб 1,2:1

Ø



■ D 3.0



■ D 3.4



■ D 3.8



■ D 4.5



■ D 5.5

Арт.

45 - 1629

45 - 1639

45 - 1649

45 - 1659

45 - 1669


Снятие оттиска на уровне имплантата

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТФОРМ

Трансфер Xive PS для открытой ложки с длинным винтом и оттискным колпачком Friadent

Масштаб 1,2:1
Для имплантатов Ø
Высота десны

D 3.8

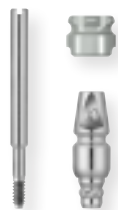

D 3.4
GH 3



D 3.4
GH 5

Примечание.

Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.

Арт.


45 - 1835

45 - 1832

Трансфер Xive PS для закрытой ложки со стандартным винтом и оттискным колпачком Friadent

Масштаб 1,2:1
Для имплантатов Ø
Высота десны

D 3.8

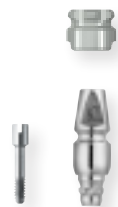

D 3.4
GH 3



D 3.4
GH 5

Арт.

45 - 1830

45 - 1831

Трансфер Xive PS тонкий (без винта)

Масштаб 1,2:1
Для имплантатов Ø

D 3.8



D 3.4

Арт.

45 - 1238

Снятие оттиска на уровне имплантата

АНАЛОГИ ИМПЛАНТАТОВ

Аналог имплантата Friadent

- Для фиксации ортопедических компонентов на мастер-модели

Аналог имплантата Friadent⁵

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.0

D 3.4

D 3.8

D 4.5

D 5.5

Арт.

45 - 4020

45 - 4030

45 - 4040

45 - 4050

45 - 4060

Аналог имплантата Friadent для фрезерования

- Предназначен для фиксации фрезеруемых ортопедических компонентов
- Изготовлен из специальной стали и имеет выраженные ретенционные элементы для противостояния силам ротации при фрезеровании абатмента

Аналог имплантата Friadent для фрезерования⁶

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.0

D 3.4

D 3.8

D 4.5

D 5.5

Арт.

45 - 2621

45 - 2631

45 - 2641

45 - 2651

45 - 2661

Снятие оттиска на уровне абатмента

НАБОРЫ

Лаб. набор для снятия оттиска
откр. ложкой Friadent MP

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø

■ D 3.4

Арт.	46 - 8230
------	-----------

Лаб. набор для снятия
оттиска закр. ложкой
Friadent MP



■ D 3.4

46 - 8130

Лаб. набор для снятия оттиска
откр. ложкой Friadent MP

Комплектация: трансфер MP для
открытой ложки, длинный винт MP,
аналог MP

Трансфер Friadent

- Для переноса положения абатмента MP на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек
- В момент снятия оттиска абатмент MP остается на имплантате

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø

■ D 3.8

Арт.	46 - 8240
------	-----------



■ D 3.8

46 - 8140

Лаб. набор для снятия оттиска
закр. ложкой Friadent MP

Комплектация: трансфер MP
для закрытой ложки, аналог MP

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта трансфера MP (для открытой ложки):

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Фиксация короткого винта трансфера MP (для закрытой ложки):

Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø

■ D 4.5

Арт.	46 - 8250
------	-----------



■ D 4.5

46 - 8150

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

Ø

■ D 5.5

Арт.	46 - 8260
------	-----------



■ D 5.5

46 - 8160

Снятие оттиска на уровне абатмента

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трансфер Friadent MP для открытой ложки² с длинным винтом MP

Трансфер Friadent MP для закрытой ложки²

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.4

Ø



D 3.4

Арт.

46 - 1630



D 3.4

46 - 1635

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø



D 3.8

Арт.

46 - 1640



D 3.8

46 - 1645

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 4.5 D 5.5

Ø



D 4.5

Арт.

46 - 1650



D 4.5

46 - 1655

Длинный винт трансфера Friadent MP⁴



Масштаб 1,2:1

Арт.

46 - 1615

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 5.5

Ø



D 5.5

Арт.

46 - 1660



D 5.5

46 - 1665

Аналог Friadent MP⁵

Масштаб 1,2:1				
Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 - 4030	46 - 4040	46 - 4050	46 - 4060

Аналог Friadent MP

- Включен в состав лаб. наборов MP для слепков
- Передается в лабораторию вместе со слепком

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста

Масштаб 1,2:1		
Ø	D 3.4 - D 5.5	D 3.4 - D 5.5
Арт.	45 - 4102	45 - 4101

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста

Комплектация: универсальный аналог Friadent для пайки и паечный винт для моста

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки

Комплектация: универсальный аналог Friadent для пайки и паечный винт для балки

Аналог Friadent для пайки⁶ универсальный

Масштаб 1,2:1			
Ø	D 3.4 - D 5.5	D 3.4 - D 5.5	D 3.4 - D 5.5
Арт.	45 - 4103	45 - 4207	45 - 4206

Винт Friadent для пайки для моста⁴

Винт Friadent для пайки для балки⁴

Аналог Friadent для пайки

- Для стабилизации каркаса на паечном основании

Абатмент EstheticBase

Абатмент Friadent EstheticBase


- Для высокоэстетичных одиночных коронок и мостовидных протезов
- Прямые и угловые
- Можно обтачивать
- Цементная или винтовая фиксация (горизонтальная или трансверзальная)

Примечание.

Область применения абатментов D 3.0 ограничивается фронтальной зоной.

Горизонтальная винтовая фиксация

Во всех абатментах Friadent EstheticBase имеется горизонтальное отверстие с резьбой (М 1.4). Для горизонтальной фиксации реставрации потребуется дополнительный горизонтальный или трансверзальный винт (стр. 40).

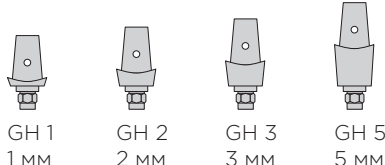

Абатмент Friadent EstheticBase прямой / A 0 с винтом абатмента EstheticBase (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 3.0 GH 1 ⁴	D 3.0 GH 2 ⁴	D 3.0 GH 3 ⁴	D 3.0 GH 5 ⁴
Арт.	46 - 2121	46 - 2122	46 - 2123	46 - 2125	

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 3.4 GH 1 ⁴	D 3.4 GH 2 ⁴	D 3.4 GH 3 ⁴	D 3.4 GH 5 ⁴
Арт.	46 - 2131	46 - 2132	46 - 2133	46 - 2135	

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 3.8 GH 1 ²	D 3.8 GH 2 ²	D 3.8 GH 3 ²	D 3.8 GH 5 ²
Арт.	46 - 2141	46 - 2142	46 - 2143	46 - 2145	

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта абатмента EstheticBase и стандартного винта абатмента D 3.0: Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Для обтачивания абатментов рекомендуется использовать специальные титановые сверла (Gebr. Brasseler, Lemgo или Jota, Германия).

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 4.5 GH 1 ²	D 4.5 GH 2 ²	D 4.5 GH 3 ²	D 4.5 GH 5 ²
Арт.	46 - 2151	46 - 2152	46 - 2153	46 - 2155	

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 5.5 GH 1 ²	D 5.5 GH 2 ²	D 5.5 GH 3 ²	D 5.5 GH 5 ²
Арт.	46 - 2161	46 - 2162	46 - 2163	46 - 2165	

Абатмент Friadent EstheticBase угловой / A 15

с винтом абатмента EstheticBase
(D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø D 3.0
Высота десны GH 1⁴

Ø D 3.0
Высота десны GH 2⁴

Ø D 3.0
Высота десны GH 3⁴

Ø D 3.0
Высота десны GH 5⁴

Арт.	46 - 2221	46 - 2222	46 - 2223	46 - 2225
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø D 3.4
Высота десны GH 1⁴

Ø D 3.4
Высота десны GH 2⁴

Ø D 3.4
Высота десны GH 3⁴

Ø D 3.4
Высота десны GH 5⁴

Арт.	46 - 2231	46 - 2232	46 - 2233	46 - 2235
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø D 3.8
Высота десны GH 1²

Ø D 3.8
Высота десны GH 2²

Ø D 3.8
Высота десны GH 3²

Ø D 3.8
Высота десны GH 5²

Арт.	46 - 2241	46 - 2242	46 - 2243	46 - 2245
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø D 4.5
Высота десны GH 1²

Ø D 4.5
Высота десны GH 2²

Ø D 4.5
Высота десны GH 3²

Ø D 4.5
Высота десны GH 5²

Арт.	46 - 2251	46 - 2252	46 - 2253	46 - 2255
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø D 5.5
Высота десны GH 1²

Ø D 5.5
Высота десны GH 2²

Ø D 5.5
Высота десны GH 3²

Ø D 5.5
Высота десны GH 5²

Арт.	46 - 2261	46 - 2262	46 - 2263	46 - 2265
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Абатмент EstheticBase

Абатмент Xive EstheticBase PS

- Реставрация с переключением платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5
- Обеспечивает долгосрочное поддержание результатов лечения

Примечание.

Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.

Абатмент Xive EstheticBase PS прямой / A 0 с винтом для EstheticBase

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.		46 - 2331	46 - 2332	46 - 2333	46 - 2335

Абатмент Xive EstheticBase PS угловой / A 15 с винтом для EstheticBase

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø	Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.		46 - 2431	46 - 2432	46 - 2433	46 - 2435

Стандартный винт абатмента Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

D 3.0

Винт Friadent для EstheticBase⁴

D 3.4 - D 5.5

Посадочное кольцо для горизонтального винта Friadent⁸

45 - 4410

Арт.	46 - 4304	46 - 4305	45 - 4410
------	-----------	-----------	-----------

Горизонтальный винт Friadent

- Винт, проходящий стенку коронки и абатмента в горизонтальном направлении с оральной стороны

Трансверсальный винт Friadent

- Фиксация коронки с оральной и с вестибулярной стенки абатмента
- Удвоенная длина резьбы для оптимальной стабильности
- Горизонтальный винт используется как трансверсальный для абатментов D 3.0 и D 3.4 для максимального задействования длины резьбы

Набор с горизонтальным винтом Friadent

Стандартный⁴ или длинный⁴ горизонтальный винт и посадочное кольцо для горизонтального винта⁸

Набор с трансверсальным винтом Friadent

Стандартный⁴ или длинный⁴ трансверсальный винт и посадочное кольцо для горизонтального винта⁸

Масштаб 1,2:1

стандартный

длинный

стандартный

длинный

Арт.	46 - 4403	46 - 4404	46 - 4407	46 - 4408
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Для моляров предпочтительнее использование длинных горизонтальных винтов из-за большей толщины коронок.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация горизонтального и трансверсального винтов:

Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

Горизонтальный винт Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

стандартный

длинный

стандартный

длинный

Арт.	46 - 4401	46 - 4402	46 - 4405	46 - 4406
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Трансверсальный винт Friadent⁴

Абатмент Cercon®

Абатмент Friadent Cercon³², прямой / A 0 с винтом Friadent для EstheticBase⁴

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø

D 3.8

D 3.8
нейтральный
дентин
GH 1

D 3.8

D 3.8
нейтральный
дентин
GH 2

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Арт.

47 - 1141

47 - 2141

47 - 1142

47 - 2142

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø

D 4.5

D 4.5
нейтральный
дентин
GH 1

D 4.5

D 4.5

D 4.5
нейтральный
дентин
GH 2

D 4.5 D 5.5

Арт.

47 - 1151

47 - 2151

47 - 1152

47 - 2152

Абатмент Friadent Cercon³², угловой / A 15 с винтом Friadent для EstheticBase⁴

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø

D 3.8

D 3.8
нейтральный
дентин
GH 1

D 3.8

D 3.8

D 3.8
нейтральный
дентин
GH 2

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Арт.

47 - 1241

47 - 2241

47 - 1242

47 - 2242

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø

D 4.5

D 4.5
нейтральный
дентин
GH 1

D 4.5

D 4.5

D 4.5
нейтральный
дентин
GH 2

D 4.5 D 5.5

Арт.

47 - 1251

47 - 2251

47 - 1252

47 - 2252

Примечание.

Область использования керамических абатментов ограничивается фронтальным отделом.

Абатмент Friadent Cercon

- Для фронтальных цельнокерамических реставраций, максимально приближенных к естественным зубам
- Очень прочные, изготовлены из диоксида циркония
- Прямые и угловые
- Индивидуализируемые путем шлифования или литья
- Два оттенка белого: нейтральный и дентин
- Непревзойденная эстетика с великолепной светопередачей

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта:

Шестигранная отвертка
Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Для обтачивания абатментов Friadent Cercon рекомендуется использовать набор боров для керамики Shaping Set компании DeguDent.

Обтачивание абатментов Cercon проводится с водным охлаждением.

Абатмент CeraBase

Абатмент Friadent CeraBase

- Двухкомпонентный абатмент для высококачественных одиночных керамических реставраций во фронтальном отделе
- Керамическая втулка на титановом основании
- Конический и анатомический дизайн

Абатмент Friadent CeraBase со стандартным винтом⁴

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø	Ø		
		D 3.4 конический ^{30/4}	D 3.4 анатомический ^{30/4}
Арт.		45 - 2530	45 - 2531

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø	Ø		
  		D 3.8 конический ^{30/3}	D 3.8 анатомический ^{30/3}
Арт.		45 - 2540	45 - 2541

Стандартный винт абатмента Friadent⁴

Масштаб 1,2:1			
Ø			
Арт.		45 - 4305	

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø	Ø		
 		D 4.5 конический ^{30/3}	D 4.5 анатомический ^{30/3}
Арт.		45 - 2550	45 - 2551

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Обтачивание керамической втулки абатмента Friadent CeraBase:

Набор Friadent CeraBase (стр. 95)

При обтачивании водное охлаждение не требуется.

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø	Ø		
		D 5.5 конический ^{30/3}	D 5.5 анатомический ^{30/3}
Арт.		45 - 2560	45 - 2561

Абатмент AuroBase

Абатмент Friadent AuroBase^{20/8}

со стандартным винтом
абатмента⁴ (D 3.0 со
стандартным винтом D 3.0)

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.0

Ø

D 3.0

Арт.

45 - 2420



Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.4

Ø

D 3.4

Арт.

45 - 2430



Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø

D 3.8

Арт.

45 - 2440



Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 4.5 D 5.5

Ø

D 4.5

Арт.

45 - 2450



Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 5.5

Ø

D 5.5

Арт.

45 - 2460



Абатмент Friadent AuroBase

- Для сложных клинических случаев, требующих изготовления индивидуальных компонентов для коронок, мостов и других типов протезов
- Для компенсации значительного расхождения осей имплантатов
- Для индивидуального воскового моделирования от уровня имплантата в случае тонкой десны

Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0⁴

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.0

Арт.

46 - 4304



Стандартный винт абатмента Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.4 - D 5.5

Арт.

45 - 4305



ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента и D 3.0:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Телескопический абатмент

Телескопический абатмент Friadent

- Простой и недорогой способ изготовления съемных и несъемных протезов на телескопической фиксации
- Для индивидуальных одиночных коронок
- Компенсация расходящихся осей имплантатов путем фрезерования

Телескопические абатменты можно облицовывать керамикой для титана (например, Duceratin, Ducera или Vita Titankeramik, Vita Zahnfabrik) для изготовления одиночных коронок с окклюзионной винтовой фиксацией.

Используйте телескопические абатменты Friadent D 3.0 только для прямой облицовки. Прямая облицовка телескопических абатментов D 3.0 и D 3.4 керамикой для титана невозможна.

Телескопический абатмент Friadent со стандартным винтом⁴ (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.0

Ø



D 3.0⁴

Арт.

45 - 2620

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.4

Ø



D 3.4⁴

Арт.

45 - 2630

Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0⁴

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.0

Арт.

46 - 4304

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 3.8 D 4.5

Ø



D 3.8²

Арт.

45 - 2640

Стандартный винт абатмента Friadent⁴

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.4 - D 5.5

Арт.

45 - 4305

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 4.5 D 5.5

Ø



D 4.5²

Арт.

45 - 2650

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента и D 3.0:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Для имплантатов Ø Масштаб 1,2:1

D 5.5

Ø



D 5.5²

Арт.

45 - 2660

Абатмент МР

Абатмент Friadent МР Платформа МР и винт МР

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1				
Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны GH 1 ⁴	GH 1 ⁴	GH 2 ⁴	GH 3 ⁴	GH 5 ⁴
Арт.	46 - 2831	46 - 2832	46 - 2833	46 - 2835

Абатмент Friadent МР

- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Для перекрывающих протезов на балках
- Абатменты остаются во рту, супраструктура изготавливается на аналогах абатментов МР
- Работа на наддесневом уровне: простое снятие оттиска, простая примерка супраструктуры

Абатмент МР состоит из платформы МР и винта МР. Абатмент подбирается по высоте (толщине) десны. Количество колец на головке винта указывает на десневую высоту соответствующей винту платформы МР.

GH 1 = 1 кольцо
GH 2 = 2 кольца
GH 3 = 3 кольца
GH 5 = 5 колец



Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны GH 1 ^{2/4}	GH 1 ^{2/4}	GH 2 ^{2/4}	GH 3 ^{2/4}	GH 5 ^{2/4}	GH 9 ^{2/4}
Арт.	46 - 2841	46 - 2842	46 - 2843	46 - 2845	46 - 2849

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны GH 1 ^{2/4}	GH 1 ^{2/4}	GH 2 ^{2/4}	GH 3 ^{2/4}	GH 5 ^{2/4}	GH 9 ^{2/4}
Арт.	46 - 2851	46 - 2852	46 - 2853	46 - 2855	46 - 2859

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1				
Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Высота десны GH 1 ^{2/4}	GH 1 ^{2/4}	GH 2 ^{2/4}	GH 3 ^{2/4}	GH 5 ^{2/4}
Арт.	46 - 2861	46 - 2862	46 - 2863	46 - 2865

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка платформы абатмента МР на имплантате:

Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного и МР абатментов (стр. 95)

Фиксация платформы абатмента МР:
Шестигранная отвертка Friadent для платформы абатмента МР (стр. 95)

Фиксация винта-заглушки МР:
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

Абатмент МР

Абатмент Xive MP PS

- Реставрация с переключением платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5
- Обеспечивает долгосрочное поддержание результатов лечения

Примечание.

Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.

Абатмент Xive MP PS

С ВИНТОМ

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø

Высота десны

D 3.4

ы GH 1

D 3.4

GH 2

D 3.4

GH 3

D 3.4

GH 5

Apt.

46 - 2921

46 - 2922

46 - 2923

46 - 2925

Винт-заглушка Friadent MP²

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.4

D 3.8

■ D 4.5

D 5.5

Apt.

46 - 1430

46 - 1440

46 - 1450

46 - 1460

Концепция SmartFix®

Ортопедическое решение на угловых имплантатах

Эффективная концепция лечения SmartFix экономит время за счет немедленной нагрузки реставраций с винтовой фиксацией на четырех имплантатах. Это обеспечивает стабильную ортопедическую посадку и позволяет обойти анатомически сложные области при помощи угловых абатментов Xive MP 15° или 30°.

Супраструктура может быть изготовлена как традиционным способом, так и CAD/CAM-методом (Atlantis), обеспечивающим высокую точность посадки.



Абатмент Xive MP, угловой* / A 15 (с головкой Xive MP*, заранее установленной на имплантоводе)

Масштаб 1,2:1				
Для имплантатов Ø		Ø D 3.4	Ø D 3.4	Ø D 3.4
Высота десны		GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	46 - 2932	46 - 2933	46 - 2935	

Платформа абатмента Xive MP* на держателе (как запасная часть)

Масштаб 1,2:1		
Арт.	46 - 3100	

Масштаб 1,2:1				
Для имплантатов Ø		Ø D 3.8 - D 5.5	Ø D 3.8 - D 5.5	Ø D 3.8 - D 5.5
Высота десны		GH 2	GH 3	GH 5
Арт.	46 - 2942	46 - 2943	46 - 2945	

Абатмент Xive MP, угловой* / A 30 (с головкой Xive MP*, заранее установленной на имплантоводе)

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø		Ø D 3.4	Ø D 3.4
Высота десны		GH 2	GH 3
Арт.	46 - 3032	46 - 3033	

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø		Ø D 3.8 - D 5.5	Ø D 3.8 - D 5.5
Высота десны		GH 2	GH 3
Арт.	46 - 3042	46 - 3043	

Мостовидный протез

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста

Комплектация: отливаемая втулка, винт MP для втулки

Лаб. наборы Friadent MP для моста

- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

Отливаемая втулка:

Перед фиксацией мостовидного протеза следует обработать поверхность абатмента, прилегающую к супраструктуре, а также посадочную площадку винта шаберами Friadent (стр. 96).

Винт Friadent MP для отливаемой втулки⁴

Масштаб 1,2:1

Ø		D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4300	

Для имплантатов Ø

D 3.4

Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста

Масштаб 1,2:1

Ø

Арт.



D 3.4

46 – 9530

Отливаемая втулка Friadent²¹



D 3.4

45 – 4330

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

Арт.



D 3.8

46 – 9540



D 3.8

45 – 4340

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

Арт.



D 4.5

46 – 9550



D 4.5

45 – 4350

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для отливаемой втулки:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø

Арт.



D 5.5

46 – 9560



D 5.5

45 – 4360

Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста

Приливаемая втулка Friadent^{20/8}

Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста
Комплектация: приливаемая втулка, винт MP для отливаемой втулки

Лаб. наборы Friadent MP для моста

- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

Приливаемая втулка:

Обработка шаберами не требуется.

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.4

Арт.

46 - 9930



D 3.4

45 - 4630

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.8

Арт.

46 - 9940



D 3.8

45 - 4640

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 4.5

Арт.

46 - 9950



D 4.5

45 - 4650

Винт Friadent MP для отливаемой втулки¹

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.4 - D 5.5

Арт.

46 - 4300

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 5.5

Арт.

46 - 9960



D 5.5

45 - 4660

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для отливаемой втулки:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Набор PassivFit, ретенционные гильзы MP

Винт Friadent MP для
отливаемой втулки¹

Масштаб 1,2:1



Ø D 3.4 - D 5.5

Арт. 46 - 4300

Для имплантатов Ø

D 3.4

Набор Friadent PassivFit²

Масштаб 1,2:1



Ø D 3.4

Арт. 45 - 4830

**Ретенционная
гильза Xive MP
короткая**



D 3.4

46 - 3130

**Ретенционная
гильза Xive MP
длинная**



D 3.4

46 - 3230

**Винт Xive MP
длинный**

Масштаб 1,2:1



Ø D 3.4 - D 5.5

Арт. 46 - 4301

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø D 3.8

Арт. 45 - 4840



D 3.8

46 - 3140



D 3.8

46 - 3240

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø D 4.5

Арт. 45 - 4850



D 4.5

46 - 3150



D 4.5

46 - 3250

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø D 5.5

Арт. 45 - 4860



D 5.5

46 - 3160



D 5.5

46 - 3260

Балочные конструкции

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.4

Арт.

46 - 9630

Золотой колпачок Friadent для балки⁹ (без винта)



D 3.4

45 - 4230

Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки

Комплектация: золотой колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки

- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48-49).

Золотой колпачок Friadent для балки

- Золотосодержащий сплав для паечной техники

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 3.8

Арт.

46 - 9640



D 3.8

45 - 4240

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 4.5

Арт.

46 - 9650



D 4.5

45 - 4250

Винт Friadent MP для колпачка⁴

Масштаб 1,2:1

Ø

D 3.4 - D 5.5

Арт.

46 - 4200

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1

Ø



D 5.5

Арт.

46 - 9660



D 5.5

45 - 4260

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:

Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Балочные конструкции

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки

Комплектация: титановый колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки

- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48–49).

Титановый колпачок для балки Friadent

- Титан для лазерной сварки

Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки

Масштаб 1,2:1



Ø

D 3.4

Арт.

46 - 9637

Титановый колпачок Friadent для балки² (без винта)



D 3.4

45 - 4231

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1



Ø

D 3.8

Арт.

46 - 9647



D 3.8

45 - 4241

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Винт Friadent MP для колпачка⁴

Масштаб 1,2:1



Ø

D 3.4 - D 5.5

Арт.

46 - 4200

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø

D 4.5

Арт.

46 - 9657



D 4.5

45 - 4251

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:

Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø

D 5.5

Арт.

46 - 9667



D 5.5

45 - 4261

Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	
		
	Ø	D 3.4
D 3.4	Арт.	46 - 9638

Отливаемый колпачок Friadent для балки²¹ (без винта)

Масштаб 1,2:1	
	
Ø	D 3.4
Арт.	45 - 4530

Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки

Комплектация: отливаемый колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки

- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48-49).

Отливаемый колпачок для балки Friadent

- Для индивидуальной моделировки

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	
		
	Ø	D 3.8
D 3.8 D 4.5 D 5.5	Арт.	46 - 9648

Масштаб 1,2:1	
	
Ø	D 3.8
Арт.	45 - 4540

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	
		
	Ø	D 4.5
D 4.5 D 5.5	Арт.	46 - 9658

Масштаб 1,2:1	
	
Ø	D 4.5
Арт.	45 - 4550

Винт Friadent MP для колпачка⁴

Масштаб 1,2:1	
	
Ø	D 3.4 - D 5.5
Арт.	46 - 4200

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	
		
	Ø	D 5.5
D 5.5	Арт.	46 - 9668

Масштаб 1,2:1	
	
Ø	D 5.5
Арт.	45 - 4560

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:

Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Золотая круглая балка Friadent⁹

Уменьшенный масштаб



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4210
------	-----------

Титановая круглая балка Friadent²



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4212
------	-----------

Золотая клипса для балки Friadent⁹



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4215
------	-----------

Концепция Locator®



Возможность простой и надежной фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты является важным фактором успеха протезирования в пожилом возрасте. Xive Locator существенно упрощает правильное размещение съемных протезов в верхней и нижней челюстях даже у пациентов с ограниченной подвижностью, небольшим окклюзионным объемом или в случаях с расходящимися имплантатами.

Система Xive Locator


- Перекрывающие протезы на двух имплантатах (при полной адентии)
- Самоцентрировка для простой фиксации во рту — посадка со щелчком
- Небольшая высота — удобно для постановки зубов при минимальной окклюзионной высоте
- Индивидуально подбираемая степень ретенции и возможность скомпенсировать расхождение осей имплантатов до 40°

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация абатмента Locator:

3-компонентная отвертка Locator или вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки (стр. 96)

Для выбора подходящего абатмента Locator нужно знать диаметр имплантата и толщину десны. Толщина десны определяет десневую высоту абатмента. Правильно подобранный абатмент должен возвышаться над десной на 1,5 мм, что соответствует высоте функциональной части абатмента.

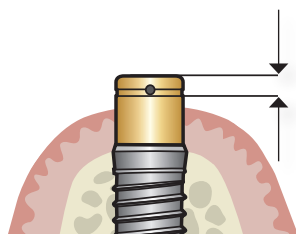

Примечание:

Функциональная часть абатмента должна быть расположена супрагингивально.

Абатмент Xive Locator®

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны GH 1	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 - 3301	26 - 3302	26 - 3303	26 - 3304	26 - 3305

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны GH 1	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 - 3311	26 - 3312	26 - 3313	26 - 3314	26 - 3315

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны GH 1	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 - 3321	26 - 3322	26 - 3323	26 - 3324	26 - 3325

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1					
Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Высота десны GH 1.3	GH 1.3	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 - 3331	26 - 3332	26 - 3333	26 - 3334	26 - 3335

Сменные патрицы Locator⁴¹ (4 шт.)

Масштаб
1,2:1



про-
зрачные,
сильная
ретенция



розовые,
слабая
ретенция



синие,
очень
слабая
ретенция



расширен-
ный спектр:
серые,
нулевая
ретенция



расширен-
ный спектр:
зеленые,
сильная
ретенция



расширен-
ный спектр:
оранжевые,
слабая
ретенция



расширен-
ный спектр:
красные,
очень
слабая
ретенция

Арт.	45 - 3349	45 - 3350	45 - 3351	45 - 3360	45 - 3352	45 - 3353	45 - 3354
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Оттисные колпачки Locator⁴² (4 шт.)

Набор аттачментов Locator (с 2 патрицами каждого типа)

Матричные аналоги Locator⁴⁵ (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



Титан⁴³

Нержавеющая
сталь⁴⁴



D 4



D 5

Арт.	45 - 3355	45 - 3347	45 - 3348	45 - 3356	45 - 3357
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Состав набора аттачментов Locator:

- 2 матрицы
- 2 спейсерных кольца
- 2 сменные прозрачные патрицы, сильная ретенция
- 2 сменные розовые патрицы, слабая ретенция
- 2 сменные синие патрицы, очень слабая ретенция

Черные рабочие патрицы Locator⁴⁶ (4 шт.)

Спейсерные кольца Locator⁴⁷ (20 шт.)

Спейсерные колпачки Locator⁴⁸ (4 шт.)

Втулка держателя абатмента Locator⁵⁰ (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



Арт.	45 - 3358	45 - 3359	45 - 3361	45 - 3341
------	-----------	-----------	-----------	-----------

3-компонентная отвертка Locator⁴⁹ со втулкой держателя абатмента Locator

Уменьшенный
масштаб



Вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки⁶



Угломер Locator⁵¹



Штифты Locator для проверки параллельности осей⁴⁶ (4 шт.)



Арт.	45 - 3340	45 - 3344	45 - 3345	45 - 3346
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Шаровидный абатмент

Шаровидный абатмент Friadent

Комплектация: платформа абатмента², винт абатмента⁴, матрица абатмента, черное силиконовое кольцо²⁶ и белое силиконовое кольцо²⁶

Шаровидный абатмент Friadent

- Для фиксации перекрывающих протезов на имплантатах на нижней челюсти
- Простой протокол с возможностью прямой перебазировки
- Компенсация расходящихся осей имплантатов

Матрица шаровидного абатмента

Friadent⁹ с белым силиконовым кольцом²⁶

Ø	■ ■ ■ ■ ■ D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 3200

Аналог патрицы шар. абатмента Friadent⁵ универсальный

Ø	■ ■ ■ ■ ■ D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4105

Аналог патрицы шар. абатмента Friadent

- Для перебазировки и починки перекрывающих протезов
- Универсальный — для всех диаметров

Уплотнительное кольцо Friadent²⁶

Арт.	45 – 3210
------	-----------

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка платформы:

Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного и MP абатментов (стр. 95)

Фиксация винта абатмента:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Активация/деактивация матрицы абатмента:

Активатор/деактиватор Friadent для шаровидного абатмента (стр. 95)

Шаровидный абатмент Friadent

Масштаб 1,2:1			
Для имплантатов Ø	Ø D 3.4	Ø D 3.4	Ø D 3.4
Высота десны	GH 1 ⁴	GH 2 ⁴	GH 3 ⁴
Арт.	45 – 3131	45 – 3132	45 – 3133

Масштаб 1,2:1				
Для имплантатов Ø	Ø D 3.8	Ø D 3.8	Ø D 3.8	Ø D 3.8
Высота десны	GH 1 ²	GH 2 ²	GH 3 ²	GH 5 ²
Арт.	45 – 3141	45 – 3142	45 – 3143	45 – 3145

Масштаб 1,2:1				
Для имплантатов Ø	Ø D 4.5	Ø D 4.5	Ø D 4.5	Ø D 4.5
Высота десны	GH 1 ²	GH 2 ²	GH 3 ²	GH 5 ²
Арт.	45 – 3151	45 – 3152	45 – 3153	45 – 3155

Масштаб 1,2:1				
Для имплантатов Ø	Ø D 5.5	Ø D 5.5	Ø D 5.5	Ø D 5.5
Высота десны	GH 1 ²	GH 2 ²	GH 3 ²	GH 5 ²
Арт.	45 – 3161	45 – 3162	45 – 3163	45 – 3165

Индивидуальные ортопедические компоненты

Абатмент Xive TitaniumBase⁴

с винтом

Для имплантатов Ø

				
	Ø	D 3.8	D 4.5	D 5.5
  	Арт.	27 - 9040	27 - 9050	27 - 9060

Абатмент Xive TitaniumBase

- Для изготовления индивидуальных керамических абатментов с титановым основанием
- Керамический абатмент склеивается с титановым основанием, имеющим стандартное соединение с имплантатом
- Две плоские поверхности препятствуют ротации

Абатмент Xive ScanBase²⁴

Для имплантатов Ø

Масштаб 1,2:1

				
	Ø	D 3.8	D 4.5	D 5.5
  	Арт.	27 - 9140	27 - 9150	27 - 9160

Абатмент Xive ScanBase

- Для сканирования геометрии абатмента
- Дизайн тот же, что и у TitaniumBase; изготовлен из пластмассы; нет необходимости в использовании спрея или порошка для сканирования
- Подходит для всех обычных дентальных сканеров

Винт Friadent для EstheticBase⁴

Масштаб 1,2:1

Ø    D 3.4 - D 5.5

Арт. 46 - 4305

Atlantis®

Абатменты и супраструктуры Atlantis для Xive

Для протезирования на имплантатах Xive S помимо стандартных абатментов и индивидуальных абатментов, изготавливаемых традиционными методами, можно использовать индивидуальные абатменты CAD/CAM. Это расширяет диапазон возможностей врача в воссоздании эстетики и функции.

На абатментах Atlantis возможно изготовление одиночных реставраций с цементной и винтовой фиксацией. Такие абатменты производятся из биосовместимых материалов: титана, титана золотистого оттенка и диоксида циркония.

Atlantis — это широкие возможности при изготовлении индивидуальных супраструктур для протезирования при полной или частичной адентии. Супраструктура фиксируется на двух и более имплантатах, при этом протез может быть как несъемным, так и съемным на аттачментах. Супраструктуры изготавливаются из двух материалов: титан или кобальт-хром*; можно заказать супраструктуру с отполированной до блеска поверхностью.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Dentsply Sirona Implants.

Индивидуальные абатменты Atlantis для Xive

- Выбор прицельного контура анатомической формы для превосходной функциональности и эстетики
- Границы уступа разработаны и размещены на идеальном уровне для простого и безопасного удаления избытков цемента
- Комплексная программа гарантийного обслуживания

Супраструктуры Atlantis для Xive

- Гибкость в подходе к протезированию при частичной и полной адентии
- Точная посадка супраструктуры без напряжений
- Материалы изготовления: титан и кобальт-хром



* Atlantis 2в1 изготавливаются только из титана.

Концепция WeldOne®



Временные реставрации на уровне имплантата

С помощью сварочного аппарата WeldOne и специальных инструментов для сварки титановая проволока прочно приваривается к абатменту. Точно рассчитанная доза электроэнергии обеспечивает оптимальное качество сварки титановых компонентов. Сварка осуществляется за несколько миллисекунд при прохождении электрического тока через точку контакта титановой проволоки с титановым абатментом. Крепкое, надежное соединение компонентов дает возможность изготовить стабильный имедиат-каркас для оптимальной опоры временного или временно-постоянного протеза. Концепция WeldOne™ разработана эксклюзивно для имплантатов компании Dentsply Sirona Implants.

Примечание. Предварительным условием приобретения сварочного аппарата WeldOne является прохождение специализированных курсов. За дополнительной информацией, в т.ч. по специализированным курсам, обращайтесь к местному представителю компании.

Временный сварочный абатмент Xive

- Для внутриротового или внеротового изготовления титанового каркаса временного имедиат-протеза на имплантатах Xive методом электросварки.

Винт Friadent для EstheticBase⁴

Ø ■ ■ ■ ■ D 3.4 – D 5.5

Арт.	46 – 4305
------	-----------

Временный сварочный абатмент Xive³ с винтом для EstheticBase⁴

Масштаб 1,2:1

Ø ■ D 3.4

Арт.	46 – 1231
------	-----------

■ D 3.8

Арт.	46 – 1241
------	-----------

■ D 4.5

Арт.	46 – 1251
------	-----------

Реставрации на уровне абатмента

Сварочная втулка Xive MP

- Для внутриротового или внеротового изготовления титанового каркаса временного протеза на абатментах MP сразу после имплантации или в более поздние сроки.

Винт для сварочной втулки⁴

Арт.	46 – 1616
------	-----------

Сварочная втулка Xive MP³

с винтом для сварочной втулки⁴

Масштаб 1,2:1

Ø ■ ■ D 3.4 – D 3.8

Арт.	45 – 4741
------	-----------

■ D 4.5

Арт.	45 – 4751
------	-----------

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта абатмента:

Шестигранная отвертка Friadent короткая/длинная (стр. 93)

Титановая проволока Friident (10 шт.)

Уменьшенный
масштаб

D 1.2 / L 100
Титан 2 класса

D 1.5 / L 150
Титан 2 класса

D 2.0 / L 150
Титан 2 класса

Арт.	47 - 3012	47 - 3013	47 - 3014
------	-----------	-----------	-----------

Вместе со специальными сварочными абатментами служит для внутриротового или внеротового изготовления каркаса протеза на имплантатах Dentsply Sirona Implants методом электросварки. Толщина титановой проволоки подбирается в зависимости от целей.

- D 1,2 мм — для дополнительных ретенций
- D 1,5 мм — если расстояние между имплантатами составляет до 8 мм
- D 2,0 мм — если расстояние между имплантатами составляет от 8 до 15 мм

Сварочный аппарат WeldOne



Уменьшенный
масштаб

Арт.	47 - 4710
------	-----------

Сварочный аппарат WeldOne

- WeldOne — это аппарат для точечной внутри- и внеротовой сварки электросопротивлением в дентальной имплантологии.
- Аппарат предназначен для сваривания в полости рта титановой проволоки со специальными титановыми абатментами, установленными на дентальных имплантатах Dentsply Sirona Implants.



Щипцы для крутого изгиба
для создания выраженных изгибов на одиночных абатментах



Щипцы для плавного изгиба
для изгиба титановой проволоки по челюстной дуге



Держатель
для плотного удержания титановой балки во время сваривания

Кусачки с твердосплавными щечками
для простого и аккуратного откусывания проволоки



При сварке рекомендуется использовать специально разработанные инструменты, производимые компанией USTOMED. Эти немногочисленные простые инструменты позволят быстро изготовить титановый каркас. За подробной информацией обращайтесь в компанию USTOMED: www.ustomed.de

Снятие оттиска

Трансферы Xive TG

- Для переноса положения трансгингивального имплантата на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек
- Имеется короткий трансфер для снятия оттиска с использованием имеющегося перекрывающего протеза

Если при расхождении осей имплантатов перенос четырехгранника головки не требуется, то используется трансфер Friadent MP D 3.8 (стр. 36). Этот трансфер совместим с имплантатами Xive TG всех диаметров.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта трансфера TG:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Трансфер для открытой ложки Xive TG² с длинным винтом



Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 – D 4.5

Арт.	25 – 1805	25 – 1701
------	-----------	-----------

Длинный винт трансфера Xive TG⁴



Ø D 3.4 – D 4.5

Оттисковый трансфер Xive TG²



Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 – D 4.5

Арт.	25 – 1600	25 – 1605
------	-----------	-----------

Оттисковый трансфер Xive TG (короткий)²



Ø D 3.4 – D 4.5

Аналоги имплантатов

Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG

- Для фиксации ортопедических компонентов на мастер-модели, а также для стабилизации каркаса на паечной основе

Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG⁶



Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 – D 4.5

Арт.	25 – 4010	25 – 4105	25 – 4106
------	-----------	-----------	-----------

Лаб. набор Xive TG с аналогом имплантата / аналогом для пайки^{4,6} (для моста)



Аналог имплантата Xive TG для пайки с винтом для абатмента

Лаб. набор Xive TG с аналогом для пайки (для балки)^{4,6}



Аналог имплантата Xive TG для пайки с винтом для колпачка

Мостовидный протез

Отливаемая втулка Xive TG²¹ с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4245

Приливаемый колпачок Xive TG^{20/8} с винтом абатмента TG

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4246

Компоненты мостовидного протеза Xive TG

- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винтов абатментов Xive TG и AuroBase

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Абатмент Xive® TG

Абатмент Xive TG² прямой / A 0 с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4500

Абатмент Xive TG² угловой / A 15 с винтом абатмента TG

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4510

Абатмент Xive TG

- Для изготовления одиночных коронок и мостовидных протезов
- Прямые и угловые
- Можно обтачивать
- Горизонтальная винтовая фиксация

Горизонтальный винт

Во всех абатментах Xive TG имеется горизонтальное отверстие с резьбой (M 1.4).

Для горизонтальной фиксации реставрации потребуется дополнительный горизонтальный или трансверсальный винт (стр. 40).

Для обтачивания абатментов рекомендуется использовать специальные титановые сверла (Gebr. Brasseler, Lemgo или Jota, Германия).

Абатмент Xive TG AuroBase

Абатмент Xive TG AuroBase^{20/8} с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4520

Винт абатмента Xive TG⁴

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 - D 4.5

Арт. 25 - 4300

Абатмент Xive® TG AuroBase

Балочные конструкции

Компоненты балочной конструкции Xive TG

- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Винт для колпачка Xive TG⁴

Масштаб 1,2:1



Арт.	25 - 4200
------	-----------

Колпачки для балок Friadent

- Золотосодержащий сплав для паечной техники
- Титан для лазерной сварки
- Для индивидуальной моделировки

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием приливаемых втулок TG (стр. 61)

Золотой колпачок для балки Xive TG⁹ с винтом для колпачка TG

Масштаб 1,2:1



Ø	■ ■ ■ D 3.4 - D 4.5
Арт.	25 - 4240

Титановый колпачок для балки Xive TG² с винтом для колпачка TG



Ø	■ ■ ■ D 3.4 - D 4.5
Арт.	25 - 4241

Отливаемый колпачок для балки Xive TG²¹ с винтом для колпачка TG



Ø	■ ■ ■ D 3.4 - D 4.5
Арт.	25 - 4242

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта TG для колпачка:

Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:

Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Золотая круглая балка Friadent⁹

Уменьшенный масштаб



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4210
------	-----------

Титановая круглая балка Friadent²



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4212
------	-----------

Золотая клипса для балки Friadent⁹



Длина 50 мм

Арт.	45 - 4215
------	-----------

Шаровидный абатмент Xive® TG

Шаровидный абатмент Xive TG^{2/4}

Масштаб 1,2:1



Ø ■ ■ ■ D 3.4 - D 4.5

Арт.

25 - 4401

Шаровидный абатмент Xive TG

- Для фиксации перекрывающих протезов на имплантатах на нижней челюсти
- Простой протокол с возможностью прямой перебазировки
- Компенсация расходящихся осей имплантатов

Патрица абатмента Xive TG, двухкомпонентная

Арт.

25 - 4406

Матрица шаровидного абатмента Xive TG

Арт.

25 - 4411

Atlantis®

Супраструктуры Atlantis для Xive

Atlantis — это широкие возможности при изготовлении индивидуальных супраструктур для протезирования на Xive TG при полной или частичной адентии. Супраструктура фиксируется на двух и более имплантатах, при этом протез может быть как несъемным, так и съемным на аттачментах. Супраструктуры изготавливаются из двух материалов: титан или кобальт-хром*; можно заказать супраструктуру с отполированной до блеска поверхностью.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Dentsply Sirona Implants.



Супраструктуры Atlantis для Xive

- Гибкость в подходе к протезированию при частичной и полной адентии
- Точная посадка супраструктуры без напряжений
- Материалы изготовления: титан и кобальт-хром

* Atlantis 2в1 изготавливаются только из титана.

Примерочные абатменты Friadent®

Примерочные абатменты Friadent

- Определение оро-вестибулярного и мезио-дистального расположения имплантата, а также расстояния от имплантата до соседних зубов
- Определение толщины десны, ангуляции и положения горизонтального винта (GH 2) для всех абатментов Friadent и Xive

Примерочный абатмент Friadent² / A 0 (прямой)

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 - 2119	45 - 2120	45 - 2121	45 - 2122	45 - 2123

Примерочный абатмент Friadent² / A 15 (угловой 15°)

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8
Арт.	45 - 2219	45 - 2220	45 - 2221

Набор примерочных абатментов Friadent² A 0 (прямые) (3 шт.)

Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 - 2193	45 - 2194	45 - 2195	45 - 2196

Набор примерочных абатментов Friadent² A 15 (угловые) (3 шт.)

Ø	D 3.4	D 3.8
Арт.	45 - 2293	45 - 2294

Примерочная втулка Friadent

- Точный перенос плана в полость рта

Пин для примерочной втулки Friadent²



Масштаб 1,2:1

Арт.	91 - 4502
------	-----------

Примерочная втулка Friadent² по проф. Ф. Кури без пина

Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 - 5025	45 - 5035	45 - 5045	45 - 5055	45 - 5065

Компоненты для планирования

Примерочный имплантат Xive²

Масштаб 1,2:1



Ø	■ D 3.0	■ D 3.4	■ D 3.8	■ D 4.5	■ D 5.5
Арт.	26 - 1520	26 - 1530	26 - 1540	26 - 1550	26 - 1560

Примерочные имплантаты Xive

- Проверка положения и оси имплантата, конгруэнтности имплантата и кости, а также расстояния до края десны во время операции

Глубиномер Xive²

D 2.0

Масштаб 1,2:1



Арт.	26 - 1510
------	-----------

Прочее

Рентгеноконтрастные шарики Friadent для предоперационной диагностики и планирования⁶



	Ø 5 мм, 12 шт.	Xive S (субгингивальный)	Xive TG (трансгингивальный)
Арт.	49 - 1211	26 - 9020	25 - 5206

Рентгенологический шаблон Xive

Хирургические наборы

Простые, индивидуализируемые, экономичные, с минимальным количеством необходимых инструментов, модульный дизайн.

- При желании можно добавлять требуемые модули
- Инструменты надежно фиксируются в силиконовых вставках
- Простая и понятная последовательность использования инструментов во время операции
- Встроенный бокс для использованных инструментов
- Легко проводится тщательная очистка

Хирургический набор Xive D 3.0 – D 5.5 / S+L

Уменьшенный масштаб



■ ■ ■ ■ ■ D 3.0 – D 5.5

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 5.5, длина инструментов: S (короткие) и L (длинные)

Арт.	26 – 6000	26 – 6005
------	-----------	-----------

Хирургический набор Xive D 3.0 – D 3.8 / S



■ ■ ■ ■ ■ D 3.0 – D 3.8

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 3.8, длина инструментов: S (короткие)

Хирургический набор Xive D 3.0 / S+L

Уменьшенный масштаб



■ D 3.0

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0, длина инструментов: S (короткие) и L (длинные)

Хирургический набор Xive GS (навигационная хирургия)




■ ■ ■ ■ ■ D 3.0 – D 4.5

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 4.5 L 8 – L 15 с использованием хирургического шаблона CAD/CAM

Арт.	26 – 6003	26 – 5000
------	-----------	-----------

Состав наборов Xive	Модуль инструментов	Модуль сверл D 3.0	Модуль сверл D 3.4 & D 3.8	Модуль сверл D 4.5 & D 5.5	Пустой модуль для сверл по личному выбору	Модульная вставка
D 3.0 – D 5.5 / S + L	•	•	•	•		
D 3.0 – D 3.8 / S	•	•	•			•
D 3.0 / S + L	•	•			•	•

Хирургические инструменты

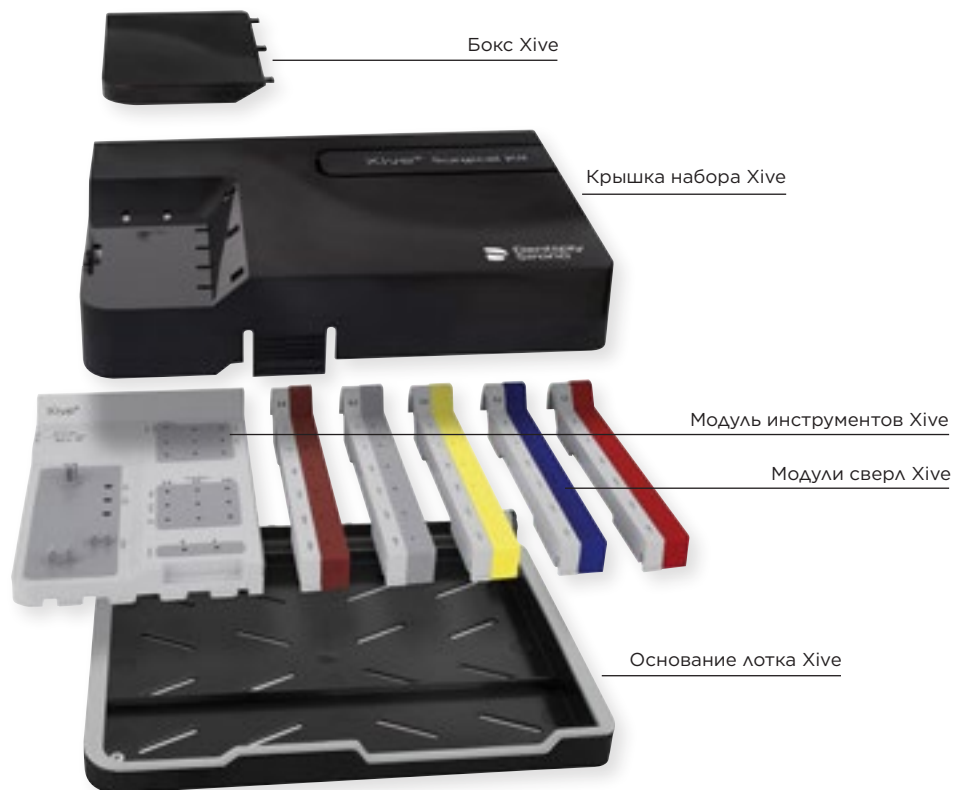

Модуль сверл Xive (пустой)

	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 - 7025	26 - 7035	26 - 7045	26 - 7055	26 - 7065

Модуль инструментов Xive (пустой)

Арт.	26 - 7200
------	-----------

Модульная вставка Xive

Арт.	26 - 7170
------	-----------

Лоток под хирургический набор Xive (пустой)

Арт.	26 - 7010
------	-----------


Лоток под хирургический набор Xive GS (пустой)

Арт.	26 - 5010
------	-----------

Хирургические наборы

 Шаровидный бор Xive D 3.0 */** Арт. 26 – 1710	 Винтовое сверло Xive D 2.0 / S */** Арт. 26 – 1715 Винтовое сверло Xive D 2.0 / L * Арт. 26 – 1718
 Вставка для трещотки для инструментов Xive */** Арт. 26 – 6120 и 2 свободных гнезда	 3 штифта для проверки параллельности Friadent D 2.0 / D 3.0 */** Арт. 45 – 5106
Ключ-трещотка Xive */** Арт. 45 – 6020	3 свободных гнезда
 Имплантовод Xive D 3.0 / S */** Арт. 26 – 6030 Имплантовод для имплантатов и TempBase Xive D 3.4 / S */** Арт. 26 – 6040 Имплантовод Xive D 3.8 – D 5.5 / S ** Арт. 26 – 6050	 Удлинитель Xive */** Арт. 26 – 6130
 Имплантовод Xive D 3.0 / L * Арт. 26 – 6035 Имплантовод для имплантатов и TempBase Xive D 3.4 / L * Арт. 26 – 6045 Имплантовод Xive D 3.8 – D 5.5 / L Арт. 26 – 6055	

Хирургические инструменты

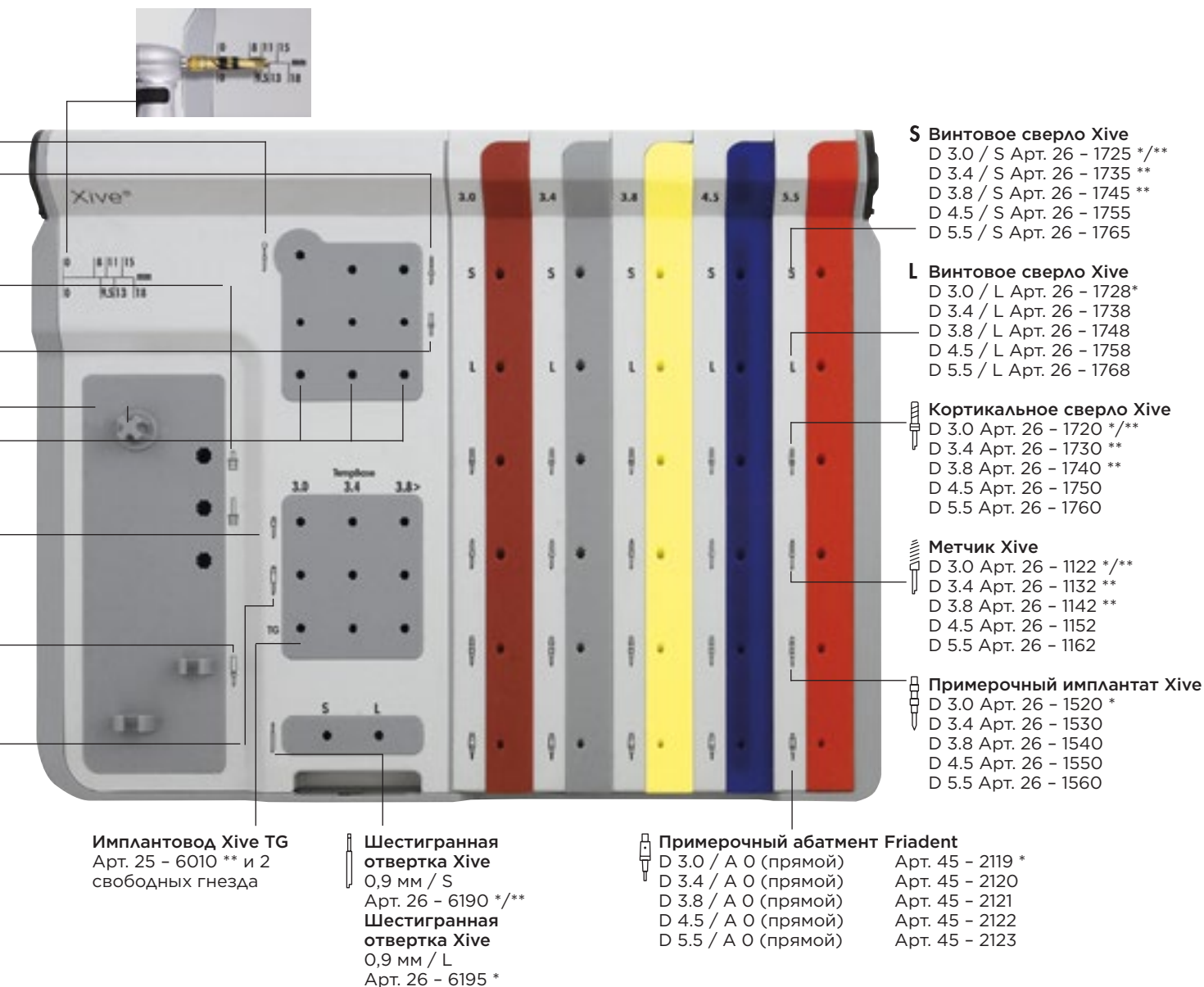

* Включено в хирургический набор Xive D 3.0 / S + L

** Включено в хирургический набор Xive D 3.0 – D 3.8 / S

Полный комплект инструментов содержится в хирургическом наборе Xive D 3.0 – D 5.5 / S + L

Лоток Washtray

Лоток Washtray позволяет выполнять машинную очистку, дезинфекцию и последующую стерилизацию инструментов паром.

- Один лоток для всех этапов повторной обработки: быстро и выгодно
- Инструменты разложены и зафиксированы в лотке во время использования и на всех этапах повторной обработки
- Съемная накладка по структуре очень похожа на имеющиеся пластмассовые хирургические наборы, что позволяет интуитивно выбирать нужные инструменты во время операции
- Отдельно можно заказать контейнер для простой, быстрой и безопасной стерилизации

Очистка и стерилизация

Необходимо снять накладку с лотка Washtray перед очисткой и установить на место перед стерилизацией.

Обратите внимание, что перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией Dentsply Sirona Implants по стерилизации инструментов и уходу за ними.

Лоток Washtray Xive (с металлическим лотком и накладкой)

Уменьшенный масштаб



Арт.

3226 7800

Контейнер для стерилизации лотка Washtray Xive (с 2 многоразовыми фильтрами для контейнера для стерилизации лотка Washtray)



3226 7802

Накладка Washtray Xive

Уменьшенный масштаб



Арт.

3226 7801

Многоразовый фильтр для контейнера для стерилизации лотка Washtray (2 шт.)



3107 1003

Держатель для стержня стандарта ISO (5 шт.)


Арт.

3107 1004

Держатель для вставки в трещотку (5 шт.)

3107 1006


Хирургические инструменты

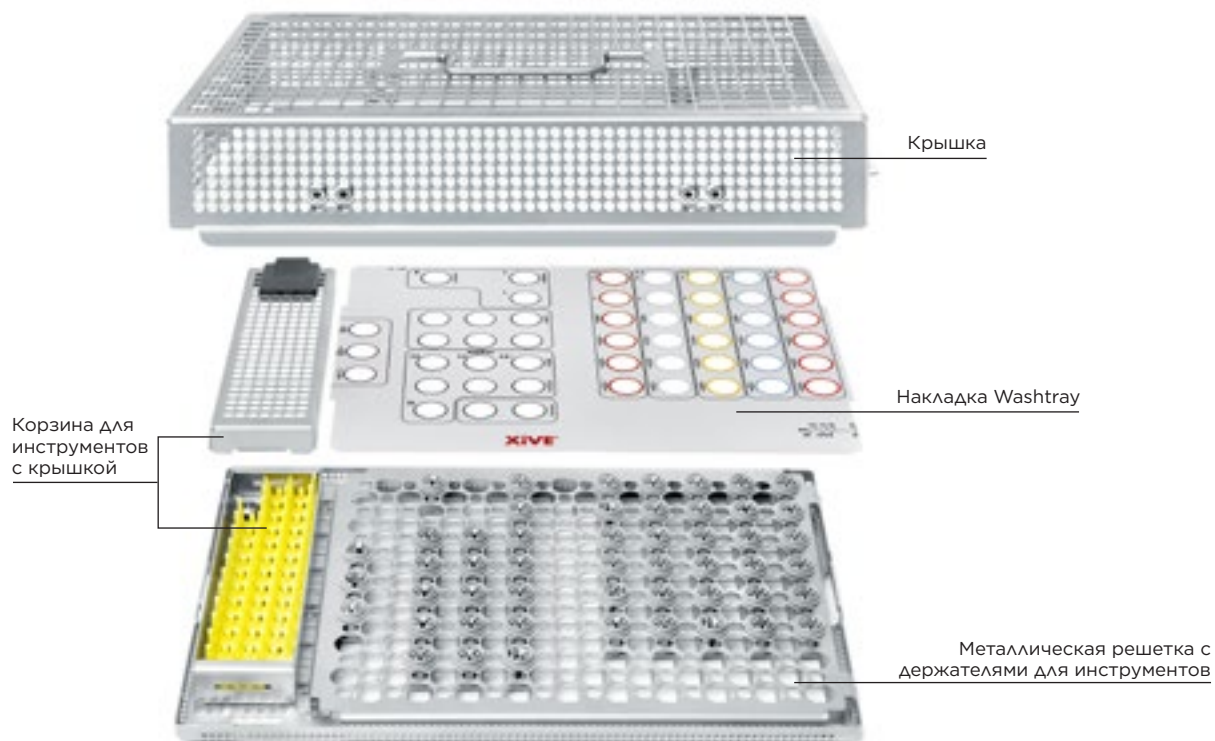

Хирургический протокол Xive®

Адекватная подготовка костного ложа — это первый этап на пути достижения оптимальной стабильности имплантата. В системе Xive предусмотрена адаптация хирургического протокола к плотности кости.

Итоговая глубина погружения кортикального сверла и дополнительное использование метчика в кости класса D I позволяют управлять степенью конденсации кости и добиваться нужного торка при вкручивании имплантата.

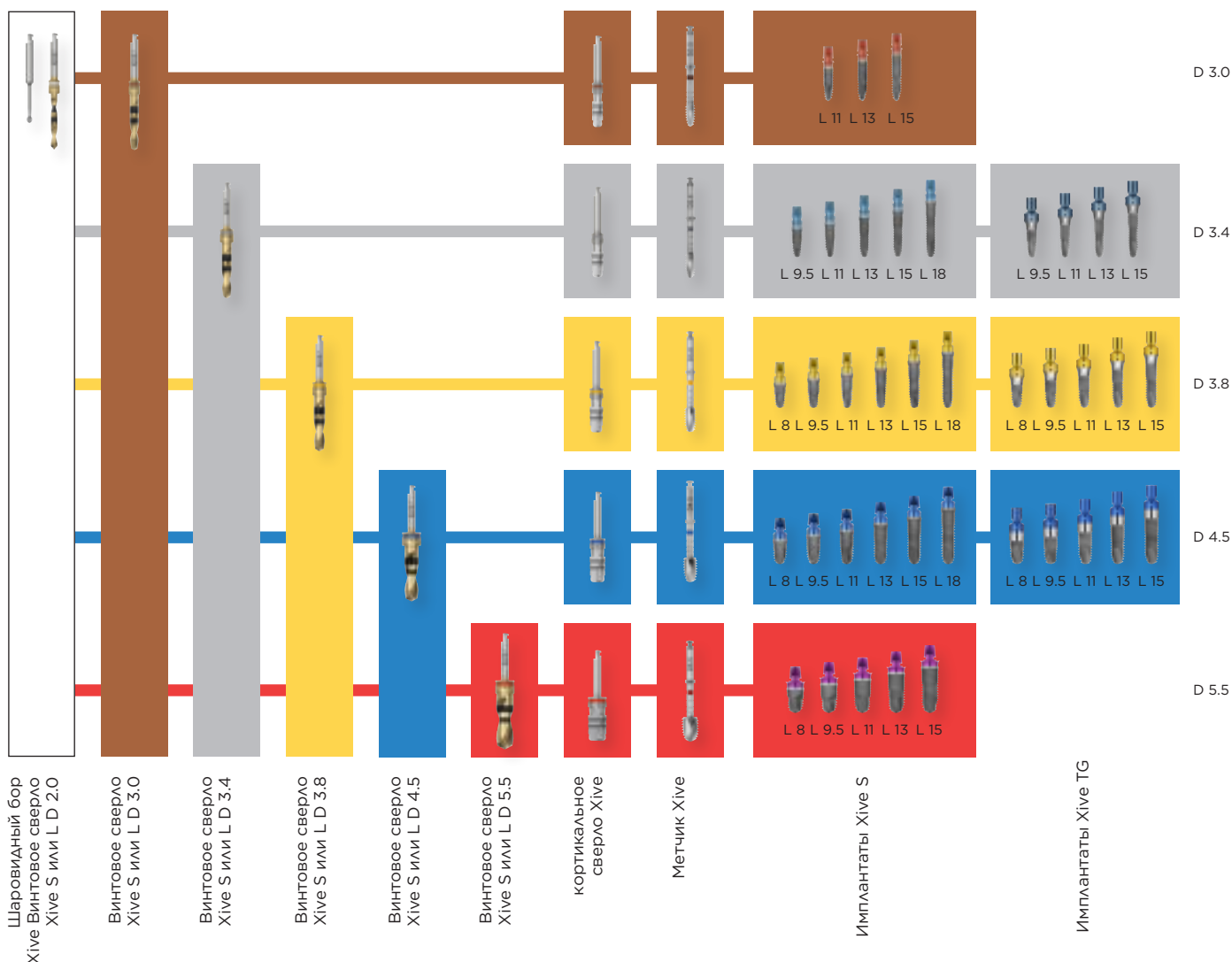


Пилотное сверление: винтовое сверло Xive D 2.0

Винтовые сверла и кортикальные сверла Xive используются на скорости не более 1500 об./мин. Убедитесь в адекватности внутреннего и внешнего водного охлаждения при сверлении. Оптимальный ток жидкости гарантируется при наличии разных источников внутреннего и внешнего охлаждения.

Маркировка кости: шаровидный бор Xive

Подготовка ложа: Винтовое сверло Xive


Пилотный канал расширяют последовательно, начиная с винтового сверла D 3.0 и заканчивая сверлом, диаметр которого соответствует диаметру имплантата

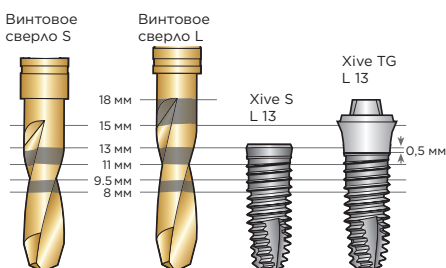

Хирургические инструменты


1-2 | Расширение кортикальной части ложа для достижения оптимальной внутренней конденсации — кортикальное сверло Xive

Глубина погружения кортикального сверла варьирует от 2 до 6 мм в зависимости от плотности кости. Это позволяет добиваться оптимальной первичной стабильности имплантата в кости любой плотности.

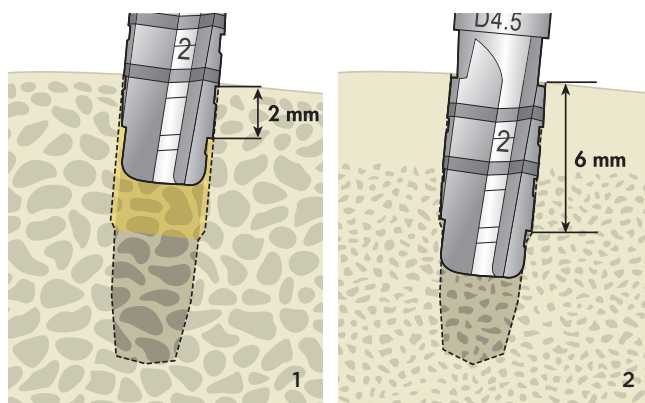

3-4 | При необходимости в канале нарезается резьба

В очень плотной кортикальной кости перед вкручиванием имплантата следует нарезать резьбу метчиком (15 об./мин) на глубину ок. 6 мм. Это снизит избыточный торк при вкручивании имплантата.

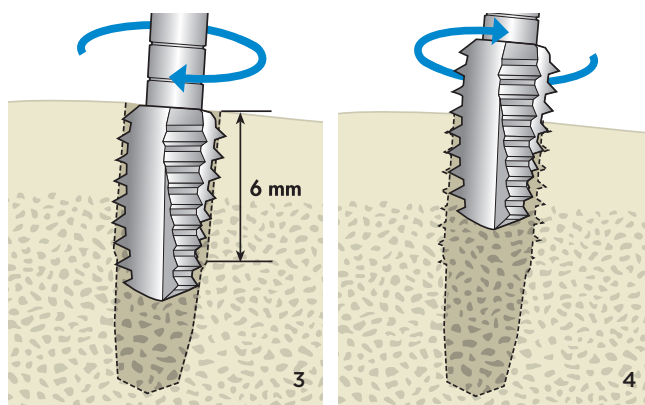

Дополнительные возможности: остеотом Xive

Очень мягкую кость можно уплотнить путем латеральной и апикальной конденсации остеотомами Xive.

При улучшении качества кости первичная стабильность имплантата увеличивается.



Одноразовые сверла Xive®

Одноразовые сверла Xive

- Винтовые сверла для подготовки ложа до указанного диаметра (на одного пациента)

Продолжение процедуры:

После расширения ложа до нужного диаметра необходимо дополнительно пройти ложе кортикальным сверлом Xive (стр. 76).

В очень плотной кости (D 1) необходимо дополнительно использовать метчик (стр. 76).

Инструменты для установки имплантатов и протезирования представлены на стр. 81-82.

Одноразовые сверла Xive — по отдельности (стерильные)

Масштаб 1:1

			
Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4
Длина	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15
Арт.	26 - 1015	26 - 1025	26 - 1035

Масштаб 1:1

			
Ø	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Длина	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15
Арт.	26 - 1045	26 - 1055	26 - 1065

Хирургические инструменты

Многоразовые сверла Xive®

Шаровидный бор Xive® (стерильный)



Масштаб 1:1

Арт.

26 - 1710

Винтовое сверло Xive S® (короткое) для имплантатов длиной 8-15 мм (стерильное)



Масштаб 1:1

Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Длина	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15	L 8 - L 15

Арт.	26 - 1715	26 - 1725	26 - 1735	26 - 1745	26 - 1755	26 - 1765
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Винтовые сверла Xive S и L

- Для расширения костного ложа до диаметра имплантата
- Без внутреннего охлаждения
- Индивидуализация длины сверла Xive за счет ограничителей погружения (стр. 77-78)

Винтовые сверла Xive S и L легко различимы благодаря цветным кольцам.

S 1
кольцо




L 2
кольца



Винтовое
сверло S

Винтовое
сверло L

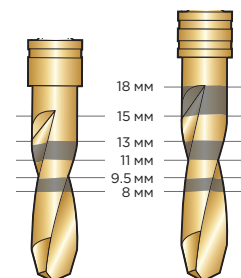

Винтовое сверло Xive L® (длинное) для имплантатов длиной 8-18 мм (стерильное)



Масштаб 1:1

Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Длина	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18

Арт.	26 - 1718	26 - 1728	26 - 1738	26 - 1748	26 - 1758	26 - 1768
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Примечание.

Режущие инструменты рассчитаны примерно на 10 циклов использования. Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

Многоразовые сверла Xive®

кортикальное сверло Xive

- Для расширения кортикальной части ложа на определенную глубину в соответствии с плотностью кости. Используется после прохождения ложа сверлом конечного диаметра
- Кортикальное сверло необходимо использовать всегда

Кортикальное сверло Xive⁶ (стерильное)



Масштаб 1:1

Ø D 3.0

Ø D 3.4

Ø D 3.8

Ø D 4.5

Ø D 5.5

Арт.

26 - 1720

26 - 1730

26 - 1740

26 - 1750

26 - 1760

Метчик Xive

- Для создания резьбы в ложе (в плотной кортикальной кости D 1)

Метчик Xive⁶



Масштаб 1:1

Ø D 3.0

Ø D 3.4

Ø D 3.8

Ø D 4.5

Ø D 5.5

Арт.

26 - 1122

26 - 1132

26 - 1142

26 - 1152

26 - 1162

Продолжение процедуры:

Инструменты для установки имплантатов и протезирования представлены на стр. 81-82.

Примечание.

Режущие инструменты рассчитаны примерно на 10 циклов использования.

Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

Хирургические инструменты

Ограничители глубины для винтовых сверл Xive® НАБОРЫ

Полный набор ограничителей Xive / S+L

Все ограничители для универсальных винтовых сверл Xive длиной S (короткие) и L (длинные).

Стандартный набор ограничителей Xive / S

Все ограничители для универсальных винтовых сверл Xive длиной S (короткие).

Арт.	26 - 1200	26 - 1205
------	-----------	-----------

Ограничители погружения Xive


- Безопасное формирование ложа под имплантат — погружение многоразовых сверл Xive универсальной длины на строго определенную глубину (длину имплантата)

Ограничители глубины Xive S и L легко различимы благодаря цветным кольцам.



ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки и снятия ограничителей Xive инструменты не требуются.

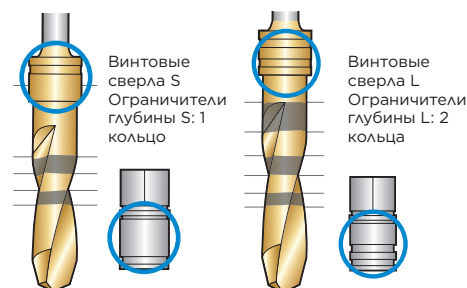

Ограничители глубины для винтовых сверл Xive® ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Ограничитель глубины Xive S⁶ (короткий)

Масштаб 1:1					
Ø	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15
Арт.	26 - 1210	26 - 1211	26 - 1212	26 - 1213	26 - 1215

Масштаб 1:1					
Ø	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15
Арт.	26 - 1230	26 - 1231	26 - 1232	26 - 1233	26 - 1235

Масштаб 1:1					
Ø	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15
Арт.	26 - 1250	26 - 1251	26 - 1252	26 - 1253	26 - 1255

Ограничители глубины для винтовых сверл Xive®

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки и снятия ограничителей Xive инструменты не требуются.

Ограничитель глубины Xive L^s (длинный)



Масштаб 1:1

Ø	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0	D 2.0 - D 3.0
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15	L 18
Арт.	26 - 1310	26 - 1311	26 - 1312	26 - 1313	26 - 1315	26 - 1318



Масштаб 1:1

Ø	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8	D 3.4 - D 3.8
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15	L 18
Арт.	26 - 1330	26 - 1331	26 - 1332	26 - 1333	26 - 1335	26 - 1338



Масштаб 1:1

Ø	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5	D 4.5 - D 5.5
Длина	L 8	L 9.5	L 11	L 13	L 15	L 18
Арт.	26 - 1350	26 - 1351	26 - 1352	26 - 1353	26 - 1355	26 - 1358

Лоток для ограничителей Xive (пустой)

Арт.	26 - 1390
------	-----------

Хирургические инструменты

Остеотом Xive®

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Остеотом Xive, прямой^{25/6}




Остеотом Xive

- Латеральная и апикальная конденсация мягкой кости
- Улучшение качества кости для достижения оптимальной первичной стабильности имплантата
- Универсальная длина с метками глубины на рабочем конце

Остеотом Xive, угловой

- Для работы в условиях ограниченного доступа и в дистальных отделах челюсти

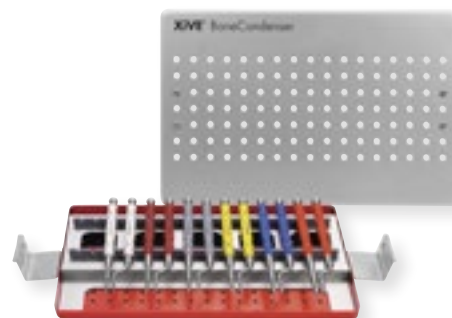

Остеотом Xive, угловой^{25/6}



Набор прямых и угловых остеотомов Xive

Лоток со всеми прямыми и угловыми остеотомами Xive

Арт.	26 - 1600
------	-----------

Набор прямых остеотомов Xive

Лоток со всеми прямыми остеотомами Xive

Арт.	26 - 1603
------	-----------

Набор угловых остеотомов Xive

Лоток со всеми угловыми остеотомами Xive

Арт.	26 - 1606
------	-----------

Другие инструменты для подготовки места имплантации

Прочтите инструкцию по применению!

Трепан Xive⁶



Масштаб 1:1

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Длина	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18	L 8 - L 18

Арт.	26 - 1129	26 - 1139	26 - 1149	26 - 1159	26 - 1169
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Удлинитель сверла Friadent

Удлинитель сверла обязательно использовать с длинной ирригационной трубкой.

Штифт для проверки параллельности Friadent²



Масштаб 1:1

D 2.0/D 3.0

Арт.	45 - 5106	91 - 0003
------	-----------	-----------

Удлинитель сверла Friadent⁶



Инструмент для очистки сверла Friadent⁶



Уменьшенный масштаб

Ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1



Длинная ирригационная трубка Friadent⁶ (для удлинителя)



Арт.	45 - 5280	90 - 5042	90 - 5043
------	-----------	-----------	-----------

Хирургические инструменты

Инструменты для установки имплантатов

Имплантовод Xive S⁶ (короткий)



Масштаб 1:1

■ для имплантатов
Xive S D 3.0

■ для имплантатов
Xive S D 3.4 и TempBase

■ ■ ■ для имплантатов
Xive S D 3.8 - D 5.5

Арт.	26 - 6030	26 - 6040	26 - 6050
------	-----------	-----------	-----------

Имплантоводы и шестигранные отвертки Xive

- Все инструменты можно использовать как с угловым наконечником, так и с трещоткой Xive

Для стандартной установки имплантатов Xive S через TempBase необходим только имплантовод Xive для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase, независимо от диаметра имплантата.

Имплантоводы других диаметров используются только при вкручивании имплантатов без TempBase.

Имплантовод Xive L⁶ (длинный)



Масштаб 1:1

■ для имплантатов
Xive S D 3.0

■ для имплантатов
Xive S D 3.4 и TempBase

■ ■ ■ для имплантатов
Xive S D 3.8 - D 5.5

Арт.	26 - 6035	26 - 6045	26 - 6055
------	-----------	-----------	-----------

Имплантовод Xive TG⁶

Шестигранные отвертки Xive⁶



Масштаб 1:1

■ ■ ■ для имплантатов
Xive TG D 3.4 - D 4.5

0,9 мм/S (короткая)

0,9 мм/L (длинная)

Арт.	25 - 6010	26 - 6190	26 - 6195
------	-----------	-----------	-----------

Инструменты для установки имплантатов

Вставка для трещотки для инструментов Xive

- Для фиксации в трещотке инструментов с хвостовиком ISO. Эти инструменты могут использоваться как с угловым наконечником, так и с трещоткой.

Ключ-трещотка Xive⁶

Уменьшенный масштаб



Вставка для трещотки для инструментов Xive⁶



Арт.

45 - 6020

26 - 6120

Удлинитель Xive⁶

Уменьшенный масштаб



Ручной имплантовод Friadent длинный⁶



Арт.

26 - 6130


46 - 5880

Хирургический ключ-трещотка Xive с индикатором торка

- Повышенная безопасность при вкручивании имплантатов вручную
- Хорошо видимый индикатор торка
- Вращение по и против часовой стрелки

Хирургический ключ-трещотка Xive с индикатором торка⁶

Уменьшенный масштаб

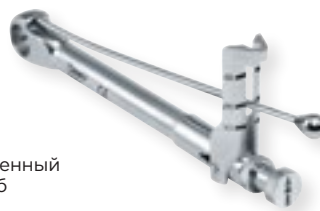

Арт.

45 - 6010

Хирургические инструменты

Инструменты для раскрытия имплантатов

Мукотом Friadent[®]

Масштаб 1:1



Ø

D 3.0

D 3.4

D 3.8

D 4.5

D 5.5

Арт.

45 - 5665

45 - 5666

45 - 5660

45 - 5661

45 - 5662

Инструменты для навигационной хирургии

СВЕРЛА

Мукотом Xive GS

- Для минимально инвазивного раскрытия имплантата

Примечание.

Инструменты с маркировкой GS используются только при навигационной хирургии.

Мукотом Xive GS[®]



Масштаб 1:1

Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 - 5201	26 - 5301	26 - 5401	26 - 5501

Начальное сверло Xive GS (для навигационной хирургии)

- Для удаления остатков мягких тканей после использования мукотома
- Для маркировки будущего положения имплантата (диаметр-специфичны)

Начальное сверло Xive[®] GS



Масштаб 1:1

Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 - 5202	26 - 5302	26 - 5402	26 - 5502

Винтовое сверло Xive GS

- Для поэтапного расширения ложа до диаметра имплантата (длина сверла соответствует длине имплантата)
- Система втулка-на сверле (сверло проходит сквозь направляющий шаблон через надетую на него втулку)

Винтовое сверло Xive[®] GS



Масштаб 1:1

Ø	D 2.0 GS	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Длина	L 8	L 8	L 8	L 8	L 8
Арт.	26 - 5108	26 - 5208	26 - 5308	26 - 5408	26 - 5508

Хирургические инструменты

Винтовое сверло Xive[®] GS

Примечание.

Режущие инструменты рассчитаны примерно на 20 циклов использования. Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

Масштаб 1:1



Ø
Длина

□ D 2.0 GS
L 9.5

■ D 3.0 GS
L 9.5

■ D 3.4 GS
L 9.5

■ D 3.8 GS
L 9.5

■ D 4.5 GS
L 9.5

Арт.

26 - 5195

26 - 5295

26 - 5395

26 - 5495

26 - 5595

Масштаб 1:1



Ø
Длина

□ D 2.0 GS
L 11

■ D 3.0 GS
L 11

■ D 3.4 GS
L 11

■ D 3.8 GS
L 11

■ D 4.5 GS
L 11

Арт.

26 - 5111

26 - 5211

26 - 5311

26 - 5411

26 - 5511

Масштаб 1:1



Ø
Длина

□ D 2.0 GS
L 13

■ D 3.0 GS
L 13

■ D 3.4 GS
L 13

■ D 3.8 GS
L 13

■ D 4.5 GS
L 13

Арт.

26 - 5113

26 - 5213

26 - 5313

26 - 5413

26 - 5513

Инструменты для навигационной хирургии

СВЕРЛА

Винтовое сверло Xive[®] GS



Масштаб 1:1

Ø Длина □ D 2.0 GS L 15 ■ D 3.0 GS L 15 ■ D 3.4 GS L 15 ■ D 3.8 GS L 15 ■ D 4.5 GS L 15

Арт.	26 - 5115	26 - 5215	26 - 5315	26 - 5415	26 - 5515
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Кортикальное сверло Xive GS

- Для расширения кортикальной части ложа на определенную глубину в соответствии с плотностью кости. Используется после прохождения ложа сверлом конечного диаметра
- Кортикальное сверло необходимо использовать всегда

Кортикальное сверло Xive GS⁶



Масштаб 1:1

Ø ■ D 3.0 GS ■ D 3.4 GS ■ D 3.8 GS ■ D 4.5 GS

Арт.	26 - 5020	26 - 5030	26 - 5040	26 - 5050
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Метчик Xive GS

- Для создания резьбы в ложе (в плотной кортикальной кости D 1)

Метчик Xive[®] GS



Масштаб 1:1

Ø ■ D 3.0 GS ■ D 3.4 GS ■ D 3.8 GS ■ D 4.5 GS


Арт.	26 - 5022	26 - 5032	26 - 5042	26 - 5052
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Хирургические инструменты

Инструменты для навигационной хирургии

ВТУЛКИ XiVE®

Набор узких втулок XiVe для винтовых сверл⁶ GS

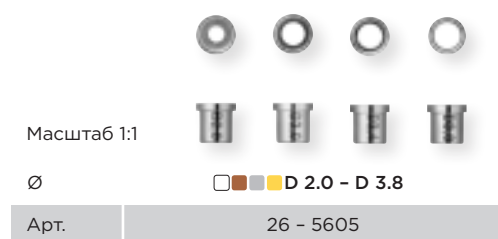


Втулки для винтовых сверл

- Для направления сверла при прохождении через хирургический шаблон (система втулка-на-сверле)


ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки втулки XiVe на сверло или имплантовод специальных инструментов не требуется.


Узкая втулка XiVe для винтовых сверл⁶ GS

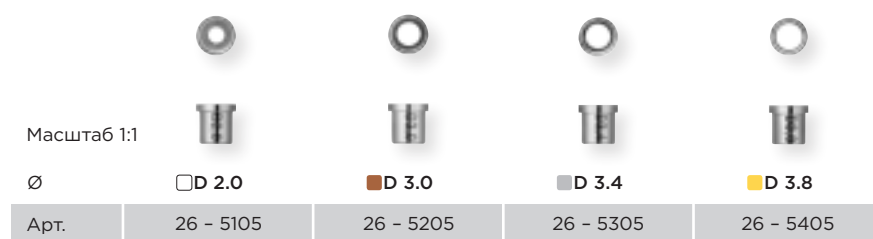

Набор широких втулок XiVe для винтовых сверл⁶ GS

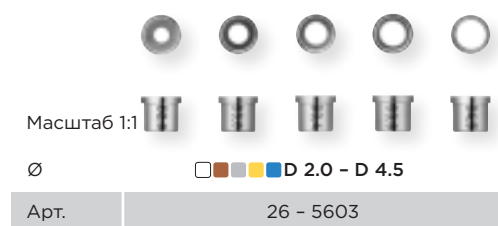

Широкая втулка XiVe для винтовых сверл⁶ GS

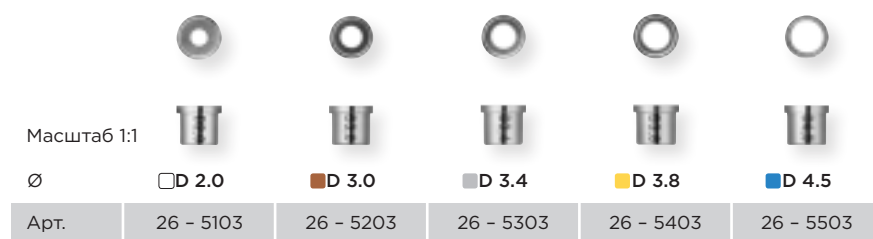

Инструменты для навигационной хирургии

ИМПЛАНТОВОДЫ

Имплантовод Xive GS

- Выпускаются двух длин (короткие и длинные) и двух диаметров (узкие и широкие); предназначены для вкручивания имплантатов Xive S D 3.0 – D 4.5 с TempBase
- Втулки можно заказать отдельно как запасные части

Другие инструменты для установки имплантатов Xive и для протезирования представлены на стр. 85–86

Имплантовод Xive[®] GS для TempBase

Масштаб 1:1



	короткий, узкий	короткий, широкий	длинный, узкий	длинный, широкий
Арт.	26 – 5700	26 – 5701	26 – 5702	26 – 5703

Широкая втулка Xive для имплантовода[®] GS

Масштаб 1:1



Арт.	26 – 5704
------	-----------

Узкая втулка Xive для имплантовода[®] GS



Арт.	26 – 5705
------	-----------

Инструменты для навигационной хирургии

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ АБАТМЕНТЫ

Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase

- Предотвращает боковое смещение и изгиб хирургического шаблона при формировании ложа под несколько имплантатов.

Стабилизирующий абатмент Xive[®] GS для TempBase

Масштаб 1:1



узкий



широкий

Арт.	26 – 5850	26 – 5852
------	-----------	-----------

Позиционер Xive GS

- По 3 позиционера GS в упаковке. Компоненты легко различимы благодаря цветовой маркировке, соответствующей диаметру имплантатов или аналогов имплантатов.
- Для установки в узкие (ND) втулки шаблонов — серебристые
- Для установки в широкие (WD) втулки шаблонов — синие

Позиционер Xive GS

Масштаб 1:1



Ø	узкий для аналога имплантата D 3.0	узкий для аналога имплантата D 3.4	узкий для аналога имплантата D 3.8	широкий для аналога имплантата D 4.5
Арт.	26 – 5821	26 – 5831	26 – 5841	26 – 5851

Хирургические инструменты

Физиодиспенсер

Физиодиспенсер Frios S/i

Комплектация: физиодиспенсер Frios S/i с хирургическим мотором (длина кабеля 1,8 м), подставка для мотора, штанга, ножная педаль вкл./выкл., кабель питания, блокиратор для мотора, набор фиксаторов трубок (5 шт.), шланг системы охлаждения



Уменьшенный масштаб

220-240 В перем. тока 100-130 В перем. тока

Арт.	90 - 6600	90 - 6605
------	-----------	-----------

Физиодиспенсер Frios S/i

- Простое управление, разработанное специально для имплантологических операций
- Мощный тихий хирургический мотор
- Понятная, логичная последовательность программ; имеется функция нарезания резьбы

Угловой наконечник Frios



Уменьшенный масштаб

WS-75
20:1 разборный



WI-75
20:1



WI-75
LED G

Арт.	90 - 6720	90 - 6710	90 - 6810
------	-----------	-----------	-----------

Угловые наконечники Frios

- Запатентованная система шестигранного зажима для большей безопасности при работе и для снижения износа инструментов
- Имеется разборная версия с поворачиваемой на 90° головкой для работы в труднодоступных участках; возможность идеальной очистки наконечника
- Имеется версия со светодиодной подсветкой — нейтральный белый свет более высокой интенсивности и с большим охватом рабочего поля (по сравнению с обычными галогеновыми лампами)

Наконечник Frios



Уменьшенный масштаб

прямой 1:1



угловой 1:1



прямой SI-11 LED G

Арт.	90 - 5030	90 - 5050	90 - 6850
------	-----------	-----------	-----------

Примечание для пользователей физиодиспенсера Frios S
При использовании данных угловых наконечников с физиодиспенсером Frios S возможны проблемы с совместимостью. Перед заказом или первым использованием посоветуйтесь со своим дистрибьютором.

Физиодиспенсер

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Информацию о доступности указанных далее запасных частей и принадлежностей для физиодиспенсеров Frios S/i, Frios S и Frios E можно получить у дистрибьютора компании Dentsply Sirona Implants.

Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S/i (длина кабеля 1,8 м)

Подходит для физиодиспенсера Frios S/i

Арт.	90 – 6620
------	-----------

Ножная педаль Frios S/i

Подходит для физиодиспенсера Frios S/i

90 – 6630

Внутренняя ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1

Подходит для физиодиспенсеров Frios S/i и Frios S

Арт.	90 – 5042
------	-----------

Длинная внутренняя ирригационная трубка (для удлинителя)

Подходит для физиодиспенсеров Frios S/i и Frios S

90 – 5043

Стерильная защитная пленка для физиодиспенсеров Frios S, Frios E для хирургического мотора (10 шт.)

Подходит для всех физиодиспенсеров Frios

Арт.	90 – 6442
------	-----------

Набор фиксаторов трубок для физиодиспенсера Frios S (5 шт.)

Подходит для всех физиодиспенсеров Frios

90 – 6443

Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S (длина кабеля 1,8 м)

Подходит для физиодиспенсера Frios S

Арт.	90 – 6410
------	-----------

Ножная педаль физиодиспенсера Frios S ВКЛ./ВЫКЛ.

Подходит для физиодиспенсера Frios S

90 – 6420

ШЛАНГИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S/i (кабель мотора 2,2 м, 5 шт.)



Уменьшенный масштаб

Арт.	90 – 6446
------	-----------

Шланг системы охлаждения для Frios ISU, универсальный (5 шт.), также подходит для ASU



Арт.	90 – 5005
------	-----------

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м, 5 шт.)



Арт.	90 – 6440
------	-----------

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м, 3 шт.)

Уменьшенный масштаб

Арт.	90 – 6441
------	-----------

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios E (кабель мотора 1,8 м, 5 шт.) с винтовым соединением люэровского типа для трехходового крана



Арт.	90 – 6542
------	-----------

Ортопедические инструменты

Ортопедические наборы

Малый ортопедический набор Friadent



Уменьшенный масштаб

Арт.	46 - 7000	26 - 8020
------	-----------	-----------

Лоток под базовый ортопедический набор Xive



Малый ортопедический набор Friadent

Включает все инструменты для фиксации реставраций на имплантатах (без МР).

Базовый ортопедический набор Xive

Включает лоток со всеми инструментами для снятия слепков и для протезирования. Инструменты поставляются в лотке под базовый ортопедический набор Xive.

Малый ортопедический набор Friadent (пустой)

Арт.	46 - 7001	26 - 8025
------	-----------	-----------

Лоток под базовый ортопедический набор Friadent (пустой)

Комплектация набора:	Малый ортопедический набор	Базовый ортопедический набор
Ключ-трещотка	■	■
Машинная шестигранная отвертка 0,9 мм (короткая)		■
Машинная шестигранная отвертка 0,9 мм (длинная)		■
Машинная шестигранная отвертка 1,22 мм (короткая)		■
Машинная шестигранная отвертка 1,22 мм (длинная)		■
Ручка для машинной отвертки		■
Ручная шестигранная отвертка 0,9 мм (короткая)	■	■
Ручная шестигранная отвертка 0,9 мм (длинная)		■
Ручная шестигранная отвертка 1,22 мм (короткая)	■	■
Ручная шестигранная отвертка 1,22 мм (длинная)		■
Инструмент для установки для платформ шаровидного и МР абатментов		■
Машинная отвертка для винта МР		■
Насадка для ключа-трещотки для винта МР		■
Примерочный абатмент прямой D 3.0 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 3.4 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 3.8 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 4.5 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 5.5 / A 0		■
Примерочный абатмент угловой D 3.0 / A 15		■
Примерочный абатмент угловой D 3.4 / A 15		■
Примерочный абатмент угловой D 3.8 / A 15		■

Ортопедические инструменты

Отдельные инструменты

Ключ-трещотка Friadent® без вставок

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 - 5709
------	-----------

Ручные шестигранные отвертки Friadent® с ограничителем торка

Масштаб 1:1



Ширина 0,9 мм
14 Нсм / короткая



Ширина 0,9 мм
14 Нсм / длинная



Ширина 1,22 мм
24 Нсм / короткая



Ширина 1,22 мм
24 Нсм / длинная

Арт.	45 - 5732	45 - 5733	45 - 5734	45 - 5736
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ручные шлицевые отвертки Friadent® с ограничителем торка

Масштаб 1:1



Ширина шлица 2,0 мм
14 Нсм / короткая



Ширина шлица 2,0 мм
14 Нсм / длинная

Арт.	45 - 5714	45 - 5722
------	-----------	-----------

Отдельные инструменты

Машинная шестигранная отвертка Friadent⁶



Масштаб 1:1

	Ширина 0,9 мм короткая	Ширина 0,9 мм длинная	Ширина 1,22 мм короткая	Ширина 1,22 мм длинная
Арт.	46 - 5710	46 - 5720	46 - 5711	46 - 5721

Машинная шлицевая отвертка Friadent⁶




Масштаб 1:1

	Ширина шлица 2,0 мм короткая	Ширина шлица 2,0 мм длинная
Арт.	46 - 5712	46 - 5722

Эта ручка подходит ко всем машинным отверткам.

В труднодоступных участках рекомендуется использовать шестигранную отвертку Friadent 0,9 мм без ограничителя торка.

Ручка Friadent для машинной шестигранной отвертки⁶

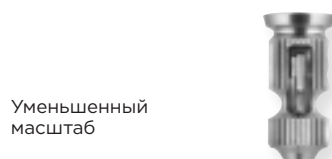

Уменьшенный масштаб


Арт.	46 - 5750
------	-----------

Шестигранная отвертка Friadent⁶ без ограничителя торка



Ширина 0,9 мм

Монтажное устройство Friadent для шестигранной отвертки

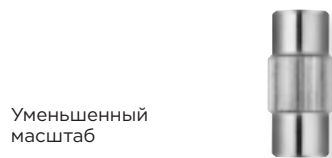

Уменьшенный масштаб

Арт.	45 - 5618
------	-----------

Ортопедические инструменты

Алмазная фреза Friadent CeraBase

Уменьшенный масштаб



Средняя зернистость



Мелкая зернистость

Арт.	45 - 5753	45 - 5755
------	-----------	-----------

Инструмент для установки Friadent² для трансфера

Уменьшенный масштаб



Инструмент для установки Friadent² для платформ шаровидного абатмента и абатмента МР



Арт.	45 - 5605	45 - 5617
------	-----------	-----------

Насадка для ключа-трещотки Friadent⁶ для винта МР с ограничителем торка

Масштаб 1:1



Машинная отвертка Friadent⁶ для винта МР (для углового наконечника)



Арт.	46 - 5610	46 - 5615
------	-----------	-----------

Активатор Friadent⁶ для шаровидного абатмента

Уменьшенный масштаб



Деактиватор Friadent⁶ для шаровидного абатмента



Арт.	45 - 5621	45 - 5622
------	-----------	-----------

Отдельные инструменты

3-компонентная отвертка Locator⁴⁹
со втулкой держателя абатмента
Locator

Уменьшенный
масштаб



Арт.	45 - 3340
------	-----------

Вставка Friadent Locator
для ортопедического
ключа-трещотки⁸

Уменьшенный
масштаб



Угломер Locator⁵¹



**Активатор балочной
клипсы Friadent⁶**



Арт.	45 - 3344	45 - 3345	45 - 5623
------	-----------	-----------	-----------

**Шабер Friadent^{6/10} для
горизонтального винта**

Уменьшенный
масштаб



**Шабер Friadent^{6/10} для
абатментов супраструктур
на винтовой фиксации**



**Шабер Friadent^{6/10} для винтов
супраструктур
на винтовой
фиксации**



Ø		D 3.4 - D 4.5	D 5.5	
Арт.	45 - 5702	45 - 5705	45 - 5707	45 - 5700

Дополнительные материалы

Демонстрационные модели

**Акриловая модель в/ч Friadent
без протеза (Ankylos, Xive, Frialit)**

Уменьшенный
масштаб



Арт.

45 - 9981

**Акриловая модель в/ч Friadent
с протезом (Ankylos, Xive, Frialit)**



45 - 9982

**Акриловая модель н/ч Xive без
протеза (балочная конструкция)**

Уменьшенный
масштаб



Арт.

45 - 9985

**Акриловая модель н/ч Xive с
протезом (балочная конструкция)**



45 - 9986

Демонстрационный набор Xive 5:1




Уменьшенный
масштаб

Арт.

26 - 9110

Брошюры для пациентов

Брошюра для пациентов
Dentsply Sirona Implants

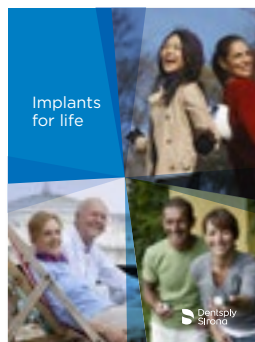

Паспорт на имплантаты
Dentsply Sirona Implants



Арт.

32670674 - USX

32670687 - USX

Дополнительные материалы

Материалы

Металлы

Тип	Индекс	Состав
Титан	1	титан 1 класса
Титан	2	титан 2 класса
Титан	3	титан 4 класса
Титан	4	титановый сплав Ti6Al4V 5 класса
Алюминий	5	AlMg ₃
Нержавеющая сталь	6	Хирургическая сталь
Нержавеющая сталь	49	316L SS SS/303 SE
Нержавеющая сталь	51	316L SS
Латунь	7	CuZn
Приливаемый сплав*	8	Au: 60 %, Pt: 19 %, Pd: 20 %, Ir: 1%
Золотой сплав**	9	Au: 68,6 %, Pt: 2,4 %, Pd: 4 %, Ag: 11,8 %, Cu: 10,6 %, Ir: 0,1 %, Zn: 2,5 %
Твердый сплав	10	K 40
Полиэтилен/алюминий	42	LDPE/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силиконовый каучук
Алюминий	45	Алюминий 6061 T6

* ТЕС $11,9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, предварительный нагрев < 850 °C, температура литья < 1450 °C; ** интервал плавления 880–940 °C

Пластмассы

Тип	Индекс	Состав
Полиоксиметилен	20	
Полиметилметакрилат (PMMA)	21	
Полистирол	22	
Политетрафторэтилен	23	
Полиэфирэфиркетон	24	
Полиэфиримид	25	
Силикон	26	
Силикон	47	Силиконовый каучук
Поликарбонат	27	
Полипропилен	28	
Полиамид	41	Нейлон Zytel 101L
Полиэтилен/алюминий	42	LDPE/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силиконовый каучук
Полиэтилен	46	LDPE
Полиоксиметилен	48	MS-002, DELRIN, 1/4"
Полисульфон	50	MS-013-1 POLYSULFONE (3/8")

Керамика

Тип	Индекс	Состав
Оксид алюминия	30	Al ₂ O ₃
Гидроксиапатит	31	Ca ₅ (PO ₄) ₃ OH
Диоксид циркония	32	ZrO ₂

Индекс

Арт.	Название	Стр.
25 - 1400	Винт-заглушка Xive TG	20
25 - 1600	Трансфер для закр. ложки Xive TG D 3.4 - D 4.5	60
25 - 1605	Трансфер для закр. ложки (короткий) Xive TG D 3.4 - D 4.5	60
25 - 1701	Длинный винт для откр. ложки Xive TG D 3.4 - D 4.5	60
25 - 1805	Трансфер для откр. ложки с длинным винтом Xive TG D 3.4 - D 4.5	60
25 - 2431	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 9.5	20
25 - 2432	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 11	20
25 - 2433	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 13	20
25 - 2435	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 15	20
25 - 2440	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 8	20
25 - 2441	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 9.5	20
25 - 2442	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 11	20
25 - 2443	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 13	20
25 - 2445	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 15	20
25 - 2450	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 8	20
25 - 2451	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 9.5	20
25 - 2452	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 11	20
25 - 2453	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 13	20
25 - 2455	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 15	20
25 - 4010	Аналог имплантата Xive TG для пайки D 3.4 - D 4.5	60
25 - 4105	Лаб. набор с аналогом Xive TG для пайки для моста D 3.4 - D 4.5	60
25 - 4106	Лаб. набор с аналогом Xive TG для пайки для балки D 3.4 - D 4.5	60
25 - 4200	Винт для колпачка Xive TG	62
25 - 4240	Золотой колпачок для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5	62
25 - 4241	Титановый колпачок для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5	62
25 - 4242	Отливаемый колпачок для балки Xive TG D 3.4 - D 4.5	62
25 - 4245	Отливаемая втулка Xive TG D 3.4 - D 4.5	61
25 - 4246	Приливаемая втулка Xive TG D 3.4 - D 4.5	61
25 - 4300	Винт абатмента Xive TG D 3.4 - D 4.5	61
25 - 4401	Шаровидный абатмент Xive TG D 3.4 - D 4.5	63
25 - 4406	Патрица шаровидного абатмента Xive TG	63
25 - 4411	Матрица шаровидного абатмента Xive TG	63
25 - 4500	Абатмент Xive TG прямой / A 0 D 3.4 - D 4.5	61
25 - 4510	Абатмент Xive TG угловой / A 15 D 3.4 - D 4.5	61
25 - 4520	Абатмент AuroBase Xive TG D 3.4 - D 4.5	61
25 - 5206	Рентгенологический шаблон Xive TG (трансгингивальный)	65

Арт.	Название	Стр.
25 - 6010	Имплантовод Xive TG D 3.4 - D 4.5	81
26 - 1015	Одноразовое сверло Xive D 2.0 / L 8 - L 15	74
26 - 1025	Одноразовое сверло Xive D 3.0 / L 8 - L 15	74
26 - 1035	Одноразовое сверло Xive D 3.4 / L 8 - L 15	74
26 - 1045	Одноразовое сверло Xive D 3.8 / L 8 - L 15	74
26 - 1055	Одноразовое сверло Xive D 4.5 / L 8 - L 15	74
26 - 1065	Одноразовое сверло Xive D 5.5 / L 8 - L 15	74
26 - 1122	Метчик Xive D 3.0	76
26 - 1129	Трепан Xive D 3.0 / L 8 - L 18	80
26 - 1132	Метчик Xive D 3.4	76
26 - 1139	Трепан Xive D 3.4 / L 8 - L 18	80
26 - 1142	Метчик Xive D 3.8	76
26 - 1149	Трепан Xive D 3.8 / L 8 - L 18	80
26 - 1152	Метчик Xive D 4.5	76
26 - 1159	Трепан Xive D 4.5 / L 8 - L 18	80
26 - 1162	Метчик Xive D 5.5	76
26 - 1169	Трепан Xive D 5.5 / L 8 - L 18	80
26 - 1200	Полный набор ограничителей Xive / S+L	77
26 - 1205	Стандартный набор ограничителей Xive / S	77
26 - 1210	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 - D 3.0 / L 8	77
26 - 1211	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 - D 3.0 / L 9.5	77
26 - 1212	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 - D 3.0 / L 11	77
26 - 1213	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 - D 3.0 / L 13	77
26 - 1215	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 - D 3.0 / L 15	77
26 - 1230	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 - D 3.8 / L 8	77
26 - 1231	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 - D 3.8 / L 9.5	77
26 - 1232	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 - D 3.8 / L 11	77
26 - 1233	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 - D 3.8 / L 13	77
26 - 1235	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 - D 3.8 / L 15	77
26 - 1250	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 - D 5.5 / L 8	77
26 - 1251	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 - D 5.5 / L 9.5	77
26 - 1252	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 - D 5.5 / L 11	77
26 - 1253	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 - D 5.5 / L 13	77

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
26 - 1255	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 - D 5.5 / L 15	77
26 - 1310	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 8	78
26 - 1311	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 9.5	78
26 - 1312	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 11	78
26 - 1313	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 13	78
26 - 1315	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 15	78
26 - 1318	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 - D 3.0 / L 18	78
26 - 1330	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 8	78
26 - 1331	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 9.5	78
26 - 1332	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 11	78
26 - 1333	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 13	78
26 - 1335	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 15	78
26 - 1338	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 - D 3.8 / L 18	78
26 - 1350	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 8	78
26 - 1351	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 9.5	78
26 - 1352	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 11	78
26 - 1353	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 13	78
26 - 1355	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 15	78
26 - 1358	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 - D 5.5 / L 18	78
26 - 1390	Лоток для ограничителей Xive (пустой)	78
26 - 1510	Глубиномер Xive D 2.0	65
26 - 1520	Примерочный имплантат Xive D 3.0	65
26 - 1530	Примерочный имплантат Xive D 3.4	65
26 - 1540	Примерочный имплантат Xive D 3.8	65
26 - 1550	Примерочный имплантат Xive D 4.5	65
26 - 1560	Примерочный имплантат Xive D 5.5	65
26 - 1600	Набор прямых и угловых остеотомов Xive	79
26 - 1603	Набор прямых остеотомов Xive	79
26 - 1606	Набор угловых остеотомов Xive	79
26 - 1610	Остеотом Xive прямой D 2.0	79
26 - 1615	Остеотом Xive угловой D 2.0	79

Арт.	Название	Стр.
26 - 1620	Остеотом Xive прямой D 3.0	79
26 - 1625	Остеотом Xive угловой D 3.0	79
26 - 1630	Остеотом Xive прямой D 3.4	79
26 - 1635	Остеотом Xive угловой D 3.4	79
26 - 1640	Остеотом Xive прямой D 3.8	79
26 - 1645	Остеотом Xive угловой D 3.8	79
26 - 1650	Остеотом Xive прямой D 4.5	79
26 - 1655	Остеотом Xive угловой D 4.5	79
26 - 1660	Остеотом Xive прямой D 5.5	79
26 - 1665	Остеотом Xive угловой D 5.5	79
26 - 1710	шаровидный бор Xive	75
26 - 1715	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 2.0 / L 8 - 15	75
26 - 1718	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 2.0 / L 8 - 18	75
26 - 1720	Кортикальное сверло Xive D 3.0	76
26 - 1725	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.0 / L 8 - 15	75
26 - 1728	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.0 / L 8 - 18	75
26 - 1730	Кортикальное сверло Xive D 3.4	76
26 - 1735	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.4 / L 8 - 15	75
26 - 1738	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.4 / L 8 - 18	75
26 - 1740	Кортикальное сверло Xive D 3.8	76
26 - 1745	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.8 / L 8 - 15	75
26 - 1748	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.8 / L 8 - 18	75
26 - 1750	Кортикальное сверло Xive D 4.5	76
26 - 1755	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 4.5 / L 8 - 15	75
26 - 1758	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 4.5 / L 8 - 18	75
26 - 1760	Кортикальное сверло Xive D 5.5	76
26 - 1765	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 5.5 / L 8 - 15	75
26 - 1768	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 5.5 / L 8 - 18	75
26 - 2422	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 11	19
26 - 2423	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 13	19
26 - 2425	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 15	19
26 - 2431	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 9.5	19
26 - 2432	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 11	19
26 - 2433	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 13	19
26 - 2435	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 15	19

Арт.	Название	Стр.
26 - 2438	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 18	19
26 - 2440	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 8	19
26 - 2441	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 9.5	19
26 - 2442	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 11	19
26 - 2443	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 13	19
26 - 2445	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 15	19
26 - 2448	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 18	19
26 - 2450	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 8	19
26 - 2451	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 9.5	19
26 - 2452	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 11	19
26 - 2453	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 13	19
26 - 2455	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 15	19
26 - 2458	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 18	19
26 - 2460	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 8	19
26 - 2461	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 9.5	19
26 - 2462	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 11	19
26 - 2463	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 13	19
26 - 2465	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 15	19
26 - 3301	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 1	54
26 - 3302	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 2	54
26 - 3303	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 3	54
26 - 3304	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 4	54
26 - 3305	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 5	54
26 - 3311	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 1	54
26 - 3312	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 2	54
26 - 3313	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 3	54
26 - 3314	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 4	54
26 - 3315	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 5	54
26 - 3321	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 1	54
26 - 3322	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 2	54
26 - 3323	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 3	54
26 - 3324	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 4	54
26 - 3325	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 5	54
26 - 3331	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 1.3	54
26 - 3332	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 2	54
26 - 3333	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 3	54
26 - 3334	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 4	54
26 - 3335	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 5	54
26 - 5000	Хирургический набор Xive GS (навигационная хирургия)	66
26 - 5010	Лоток под хирургический набор Xive GS (пустой)	67
26 - 5020	Кортикальное сверло Xive GS D 3.0	86

Арт.	Название	Стр.
26 - 5022	Метчик Xive GS D 3.0	86
26 - 5030	Кортикальное сверло Xive GS D 3.4	86
26 - 5032	Метчик Xive GS D 3.4	86
26 - 5040	Кортикальное сверло Xive GS D 3.8	86
26 - 5042	Метчик Xive GS D 3.8	86
26 - 5050	Кортикальное сверло Xive GS D 4.5	86
26 - 5052	Метчик Xive GS D 4.5	86
26 - 5103	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 2.0	87
26 - 5105	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 2.0	87
26 - 5108	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 8	84
26 - 5111	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 11	85
26 - 5113	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 13	85
26 - 5115	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 15	86
26 - 5195	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 9.5	85
26 - 5201	Мукотом Xive GS D 3.0	84
26 - 5202	Начальное сверло Xive GS D 3.0	84
26 - 5203	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.0	87
26 - 5205	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.0	87
26 - 5208	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 8	84
26 - 5211	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 11	85
26 - 5213	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 13	85
26 - 5215	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 15	86
26 - 5295	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 9.5	85
26 - 5301	Мукотом Xive GS D 3.4	84
26 - 5302	Начальное сверло Xive GS D 3.4	84
26 - 5303	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.4	87
26 - 5305	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.4	87
26 - 5308	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 8	84
26 - 5311	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 11	85
26 - 5313	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 13	85
26 - 5315	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 15	86
26 - 5395	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 9.5	85
26 - 5401	Мукотом Xive GS D 3.8	84
26 - 5402	Начальное сверло Xive GS D 3.8	84
26 - 5403	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.8	87
26 - 5405	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.8	87
26 - 5408	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 8	84
26 - 5411	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 11	85

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
26 - 5413	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 13	85
26 - 5415	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 15	86
26 - 5495	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 9.5	85
26 - 5501	Мукотом Xive GS D 4.5	84
26 - 5502	Начальное сверло Xive GS D 4.5	84
26 - 5503	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 4.5	87
26 - 5508	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 8	84
26 - 5511	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 11	85
26 - 5513	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 13	85
26 - 5515	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 15	86
26 - 5595	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 9.5	85
26 - 5603	Набор широких втулок для винтовых сверл Xive GS D 2.0 - D 4.5	87
26 - 5605	Набор узких втулок для винтовых сверл Xive GS D 2.0 - D 3.8	87
26 - 5700	Имплантовод Xive GS для TempBase, короткий, узкий	88
26 - 5701	Имплантовод Xive GS для TempBase, короткий, широкий	88
26 - 5702	Имплантовод Xive GS для TempBase, длинный, узкий	88
26 - 5703	Имплантовод Xive GS для TempBase, длинный, широкий	88
26 - 5704	Широкая втулка Xive для имплантовода GS	88
26 - 5705	Узкая втулка Xive для имплантовода GS	88
26 - 5821	Позиционер Xive GS узкий для аналога имплантата D 3.0	88
26 - 5831	Позиционер Xive GS узкий для аналога имплантата D 3.4	88
26 - 5841	Позиционер Xive GS узкий для аналога имплантата D 3.8	88
26 - 5850	Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase узкий	88
26 - 5851	Позиционер Xive GS широкий для аналога имплантата D 4.5	88
26 - 5852	Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase широкий	88
26 - 6000	Хирургический набор Xive D 3.0 - D 5.5 / S+L	66
26 - 6003	Хирургический набор Xive D 3.0 / S+L	66
26 - 6005	Хирургический набор Xive D 3.0 - D 3.8 / S	66
26 - 6030	Имплантовод S (короткий) для имплантатов Xive S D 3.0	81
26 - 6035	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.0	81
26 - 6040	Имплантовод S (короткий) для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	81
26 - 6045	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	81
26 - 6050	для имплантатов Xive S D 3.8 - D 5.5	81

Арт.	Название	Стр.
26 - 6055	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.8 - D 5.5	81
26 - 6120	Вставка для трещотки для инструментов Xive	82
26 - 6130	Удлинитель Xive	82
26 - 6190	Машинная шестигранная отвертка Xive 0,9 мм / S (короткая)	81
26 - 6195	Машинная шестигранная отвертка Xive 0,9 мм / L (длинная)	81
26 - 7010	Лоток под хирургический набор Xive (пустой)	67
26 - 7025	Модуль сверл Xive D 3.0 (пустой)	67
26 - 7035	Модуль сверл Xive D 3.4 (пустой)	67
26 - 7045	Модуль сверл Xive D 3.8 (пустой)	67
26 - 7055	Модуль сверл Xive D 4.5 (пустой)	67
26 - 7065	Модуль сверл Xive D 5.5 (пустой)	67
26 - 7170	Модульная вставка Xive	67
26 - 7200	Модуль инструментов Xive (пустой)	67
26 - 8020	Базовый ортопедический набор Xive	91
26 - 8025	Лоток под базовый ортопедический набор Xive (пустой)	91
26 - 9020	Рентгенологический шаблон Xive S (субгингивальный)	65
26 - 9110	Демонстрационный набор Xive 5:1	97
27 - 9040	Абатмент Xive TitaniumBase D 3.8	57
27 - 9050	Абатмент Xive TitaniumBase D 4.5	57
27 - 9060	Абатмент Xive TitaniumBase D 5.5	57
27 - 9140	Абатмент Xive ScanBase D 3.8	57
27 - 9150	Абатмент Xive ScanBase D 4.5	57
27 - 9160	Абатмент Xive ScanBase D 5.5	57
3107 1003	Многоразовый фильтр для контейнера для стерилизации лотка Washtray (2 шт.)	70
3107 1004	Держатель для стержня стандарта ISO (5 шт.)	70
3107 1006	Держатель для вставки в трещотку (5 шт.)	70
3226 7800	Лоток Washtray Xive (с металлическим лотком и накладкой)	70
3226 7801	Накладка Washtray Xive	70
3226 7802	Контейнер для стерилизации лотка Washtray Xive (с 2 многоразовыми фильтрами для контейнера для стерилизации лотка Washtray)	70
45 - 1110	Винт-заглушка Xive PS D 3.4	18
45 - 1120	Винт-заглушка Friadent D 3.0	18
45 - 1130	Винт-заглушка Friadent D 3.4	18
45 - 1140	Винт-заглушка Friadent D 3.8	18
45 - 1150	Винт-заглушка Friadent D 4.5	18
45 - 1160	Винт-заглушка Friadent D 5.5	18

Арт.	Название	Стр.
45 - 1222	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 2	23
45 - 1223	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 3	23
45 - 1225	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 5	23
45 - 1232	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 2	23
45 - 1233	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 3	23
45 - 1235	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 5	23
45 - 1238	Трансфер Xive S тонкий D 3.4	33
45 - 1239	Трансфер Friadent тонкий D 3.4	31
45 - 1242	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 2	23
45 - 1243	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 3	23
45 - 1245	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 5	23
45 - 1249	Трансфер Friadent тонкий D 3.8	31
45 - 1252	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 2	23
45 - 1253	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 3	23
45 - 1255	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 5	23
45 - 1259	Трансфер Friadent тонкий D 4.5	31
45 - 1333	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.4 / GH 3	24
45 - 1335	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.4 / GH 5	24
45 - 1343	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.8 / GH 3	24
45 - 1345	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.8 / GH 5	24
45 - 1353	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 4.5 / GH 3	24
45 - 1355	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 4.5 / GH 5	24
45 - 1363	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 5.5 / GH 3	24
45 - 1365	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 5.5 / GH 5	24
45 - 1421	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 1	22
45 - 1422	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 2	22
45 - 1423	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 3	22
45 - 1425	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 5	22
45 - 1431	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 1	22
45 - 1432	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 2	22

Арт.	Название	Стр.
45 - 1433	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 3	22
45 - 1435	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 5	22
45 - 1441	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 1	22
45 - 1442	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 2	22
45 - 1443	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 3	22
45 - 1445	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 5	22
45 - 1451	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 1	22
45 - 1452	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 2	22
45 - 1453	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 3	22
45 - 1455	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 5	22
45 - 1461	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 1	22
45 - 1462	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 2	22
45 - 1463	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 3	22
45 - 1465	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 5	22
45 - 1531	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 1	23
45 - 1532	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 2	23
45 - 1533	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 3	23
45 - 1535	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 5	23
45 - 1615	Длинный винт трансфера Friadent D 3.4 - D 5.5	32
45 - 1620	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 3	30
45 - 1621	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 5	30
45 - 1622	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 5	29
45 - 1625	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 3	29
45 - 1629	Набор оттисковых колпачков Friadent D 3.0	32
45 - 1630	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 3	30
45 - 1631	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 5	30
45 - 1632	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 5	29
45 - 1635	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 3	29
45 - 1639	Набор оттисковых колпачков Friadent D 3.4	32
45 - 1640	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 3	30
45 - 1641	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 5	30
45 - 1642	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 5	29
45 - 1645	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 3	29
45 - 1649	Набор оттисковых колпачков Friadent D 3.8	32

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
45 - 1650	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 3	30
45 - 1651	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 5	30
45 - 1652	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 5	29
45 - 1655	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 3	29
45 - 1659	Набор оттисковых колпачков Friadent D 4.5	32
45 - 1660	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 3	30
45 - 1661	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 5	30
45 - 1662	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 5	29
45 - 1665	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 3	29
45 - 1669	Набор оттисковых колпачков Friadent D 5.5	32
45 - 1830	Трансфер Xive PS для закр. ложки D 3.4 / GH 3	33
45 - 1831	Трансфер Xive PS для закр. ложки D 3.4 / GH 5	33
45 - 1832	Трансфер Xive PS для откр. ложки D 3.4 / GH 5	33
45 - 1835	Трансфер Xive PS для откр. ложки D 3.4 / GH 3	33
45 - 2119	Примерочный абатмент Friadent D 3.0 / A 0 (прямой)	64
45 - 2120	Примерочный абатмент Friadent D 3.4 / A 0 (прямой)	64
45 - 2121	Примерочный абатмент Friadent D 3.8 / A 0 (прямой)	64
45 - 2122	Примерочный абатмент Friadent D 4.5 / A 0 (прямой)	64
45 - 2123	Примерочный абатмент Friadent D 5.5 / A 0 (прямой)	64
45 - 2193	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.4 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 - 2194	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.8 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 - 2195	Набор примерочных абатментов Friadent D 4.5 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 - 2196	Набор примерочных абатментов Friadent D 5.5 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 - 2219	Примерочный абатмент Friadent D 3.0 / A 15 (угловой 15°)	64
45 - 2220	Примерочный абатмент Friadent D 3.4 / A 15 (угловой 15°)	64
45 - 2221	Примерочный абатмент Friadent D 3.8 / A 15 (угловой 15°)	64
45 - 2293	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.4 / A 15 (угловые, 3 шт.)	64

Арт.	Название	Стр.
45 - 2294	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.8 / A 15 (угловые, 3 шт.)	64
45 - 2420	Абатмент Friadent AuroBase D 3.0	43
45 - 2430	Абатмент Friadent AuroBase D 3.4	43
45 - 2440	Абатмент Friadent AuroBase D 3.8	43
45 - 2450	Абатмент Friadent AuroBase D 4.5	43
45 - 2460	Абатмент Friadent AuroBase D 5.5	43
45 - 2530	Абатмент Friadent CeraBase D 3.4 конический	42
45 - 2531	Абатмент Friadent CeraBase D 3.4 анатомический	42
45 - 2540	Абатмент Friadent CeraBase D 3.8 конический	42
45 - 2541	Абатмент Friadent CeraBase D 3.8 анатомический	42
45 - 2550	Абатмент Friadent CeraBase D 4.5 конический	42
45 - 2551	Абатмент Friadent CeraBase D 4.5 анатомический	42
45 - 2560	Абатмент Friadent CeraBase D 5.5 конический	42
45 - 2561	Абатмент Friadent CeraBase D 5.5 анатомический	42
45 - 2620	Телескопический абатмент Friadent D 3.0	44
45 - 2621	Аналог Friadent для фрезерования D 3.0	34
45 - 2630	Телескопический абатмент Friadent D 3.4	44
45 - 2631	Аналог Friadent для фрезерования D 3.4	34
45 - 2640	Телескопический абатмент Friadent D 3.8	44
45 - 2641	Аналог Friadent для фрезерования D 3.8	34
45 - 2650	Телескопический абатмент Friadent D 4.5	44
45 - 2651	Аналог Friadent для фрезерования D 4.5	34
45 - 2660	Телескопический абатмент Friadent D 5.5	44
45 - 2661	Аналог Friadent для фрезерования D 5.5	34
45 - 3131	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 1	56
45 - 3132	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 2	56
45 - 3133	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 3	56
45 - 3141	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 1	56
45 - 3142	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 2	56
45 - 3143	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 3	56
45 - 3145	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 5	56
45 - 3151	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 1	56
45 - 3152	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 2	56
45 - 3153	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 3	56
45 - 3155	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 5	56
45 - 3161	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 1	56
45 - 3162	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 2	56

Арт.	Название	Стр.
45 - 3163	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 3	56
45 - 3165	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 5	56
45 - 3200	Матрица шар. абатмента Friadent D 3.4 - D 5.5	56
45 - 3210	Уплотнительное кольцо Friadent	56
45 - 3340	3-компонентная отвертка Locator	55
45 - 3341	Втулка держателя абатмента Locator	55
45 - 3344	Вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки	55
45 - 3345	Угломер Locator	55
45 - 3346	Штифт Locator для проверки параллельности	55
45 - 3347	Набор аттачментов Locator (титан)	55
45 - 3348	Набор аттачментов Locator (нерж. сталь)	55
45 - 3349	Сменная матрица Locator — прозрачная, сильная ретенция	55
45 - 3350	Сменная матрица Locator — розовая, слабая ретенция	55
45 - 3351	Сменная матрица Locator — синяя, очень слабая ретенция	55
45 - 3352	Сменная матрица Locator — расширенный спектр: зеленая, сильная ретенция	55
45 - 3353	Сменная матрица Locator — расширенный спектр: оранжевая, слабая ретенция	55
45 - 3354	Сменная матрица Locator — расширенный спектр: красная, очень слабая ретенция	55
45 - 3355	Оттисковой колпачок Locator	55
45 - 3356	Матричный аналог Locator D 4	55
45 - 3357	Матричный аналог Locator D 5	55
45 - 3358	Черная рабочая матрица Locator	55
45 - 3359	Спейсерное кольцо Locator	55
45 - 3360	Сменная матрица Locator — расширенный спектр: серая, нулевая ретенция	55
45 - 3361	Спейсерный колпачок Locator	55
45 - 4020	Аналог имплантата Friadent D 3.0	34
45 - 4030	Аналог имплантата Friadent D 3.4	34
45 - 4040	Аналог имплантата Friadent D 3.8	34
45 - 4050	Аналог имплантата Friadent D 4.5	34
45 - 4060	Аналог имплантата Friadent D 5.5	34
45 - 4101	Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки D 3.4 - D 5.5	37
45 - 4102	Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста D 3.4 - D 5.5	37
45 - 4103	Аналог для пайки Friadent, универсальный, D 3.4 - D 5.5	37
45 - 4105	Аналог матрицы шар. абатмента Friadent, универсальный, D 3.4 - D 5.5	56

Арт.	Название	Стр.
45 - 4206	Винт Friadent для пайки для балки D 3.4 - D 5.5	37
45 - 4207	Винт Friadent для пайки для моста D 3.4 - D 5.5	40
45 - 4210	Круглая золотая балка Friadent, длина 50 мм	53
45 - 4212	Круглая титановая балка Friadent, длина 50 мм	53
45 - 4215	Клипса для золотой балки Friadent, длина 50 мм	53
45 - 4230	Золотой колпачок для балки Friadent D 3.4	51
45 - 4231	Титановый колпачок для балки Friadent D 3.4	52
45 - 4240	Золотой колпачок для балки Friadent D 3.8	51
45 - 4241	Титановый колпачок для балки Friadent D 3.8	52
45 - 4250	Золотой колпачок для балки Friadent D 4.5	51
45 - 4251	Титановый колпачок для балки Friadent D 4.5	52
45 - 4260	Золотой колпачок для балки Friadent D 5.5	51
45 - 4261	Титановый колпачок для балки Friadent D 5.5	52
45 - 4305	Стандартный винт абатмента Friadent D 3.4 - 5.5	32
45 - 4330	Отливаемая втулка Friadent D 3.4	48
45 - 4340	Отливаемая втулка Friadent D 3.8	48
45 - 4350	Отливаемая втулка Friadent D 4.5	48
45 - 4360	Отливаемая втулка Friadent D 5.5	48
45 - 4410	Посадочное кольцо для горизонтального винта Friadent	40
45 - 4530	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 3.4	53
45 - 4540	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 3.8	53
45 - 4550	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 4.5	53
45 - 4560	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 5.5	53
45 - 4630	Приливаемая втулка Friadent D 3.4	49
45 - 4640	Приливаемая втулка Friadent D 3.8	49
45 - 4650	Приливаемая втулка Friadent D 4.5	49
45 - 4660	Приливаемая втулка Friadent D 5.5	49
45 - 4741	Сварочная втулка Xive MP D 3.4 - D 3.8	58
45 - 4751	Сварочная втулка Xive MP D 4.5	58
45 - 4830	Набор Friadent PassivFit D 3.4	50
45 - 4840	Набор Friadent PassivFit D 3.8	50
45 - 4850	Набор Friadent PassivFit D 4.5	50
45 - 4860	Набор Friadent PassivFit D 5.5	50
45 - 5025	Примерочная втулка Friadent D 3.0	64

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
45 - 5035	Примерочная втулка Friadent D 3.4	64
45 - 5045	Примерочная втулка Friadent D 3.8	64
45 - 5055	Примерочная втулка Friadent D 4.5	64
45 - 5065	Примерочная втулка Friadent D 5.5	64
45 - 5106	Штифт для проверки параллельности Friadent D 2.0 / 3.0	80
45 - 5280	Инструмент для очистки сверла Friadent	80
45 - 5605	Инструмент для установки Friadent для трансфера	95
45 - 5617	Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного абатмента и абатмента МР	95
45 - 5618	Монтажное устройство Friadent для шестигранной отвертки	94
45 - 5621	Активатор Friadent для шаровидного абатмента	95
45 - 5622	Деактиватор Friadent для шаровидного абатмента	95
45 - 5623	Активатор балочной клипсы Friadent	96
45 - 5650	Шестигранная отвертка Friadent, ширина 0,9 мм	94
45 - 5660	Мукотом Friadent D 3.8	83
45 - 5661	Мукотом Friadent D 4.5	83
45 - 5662	Мукотом Friadent D 5.5	83
45 - 5665	Мукотом Friadent D 3.0	83
45 - 5666	Мукотом Friadent D 3.4	83
45 - 5700	Шабер Friadent для винтов супраструктур на винтовой фиксации	96
45 - 5702	Шабер Friadent для горизонтального винта	96
45 - 5705	Шабер Friadent для абатментов супраструктур на винтовой фиксации D 3.4 - D 4.5	96
45 - 5707	Шабер Friadent для абатментов супраструктур на винтовой фиксации D 5.5	96
45 - 5709	Ключ-трещотка Friadent	93
45 - 5714	Шлицевая отвертка Friadent с шириной шлица 2,0 мм / 14 Нсм / короткая	93
45 - 5722	Шлицевая отвертка Friadent с шириной шлица 2,0 мм / 14 Нсм / длинная	93
45 - 5732	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 0,9 мм / 14 Нсм / короткая	93
45 - 5733	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 0,9 мм / 14 Нсм / длинная	93
45 - 5734	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 1,22 мм / 24 Нсм / короткая	93
45 - 5736	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 1,22 мм / 24 Нсм / длинная	93
45 - 5753	Алмазная фреза Friadent CeraBase, средняя зернистость	95

Арт.	Название	Стр.
45 - 5755	Алмазная фреза Friadent CeraBase, мелкая зернистость	95
45 - 6010	Хирургический ключ-трещотка Xive	82
45 - 6020	Ключ-трещотка Xive	82
45 - 9981	Акриловая модель в/ч Friadent без протеза	97
45 - 9982	Акриловая модель в/ч Friadent с протезом	97
45 - 9985	Акриловая модель н/ч Xive без протеза (балочная конструкция)	97
45 - 9986	Акриловая модель н/ч Xive с протезом (балочная конструкция)	97
46 - 1220	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.0	21
46 - 1230	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.4	21
46 - 1231	Временный сварочный абатмент Xive D 3.4	58
46 - 1235	Колпачок Friadent TempBase Cap D 3.0 - D 3.8	21
46 - 1240	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.8	21
46 - 1241	Временный сварочный абатмент Xive D 3.8	58
46 - 1250	Временный абатмент Friadent TempBase D 4.5	21
46 - 1251	Временный сварочный абатмент Xive D 4.5	58
46 - 1255	Колпачок Friadent TempBase Cap D 4.5	21
46 - 1260	Временный абатмент Friadent TempBase D 5.5	21
46 - 1265	Колпачок Friadent TempBase Cap D 5.5	21
46 - 1279	Винт для Friadent TempBase D 3.0	21
46 - 1280	Винт для Friadent TempBase D 3.4 - D 5.5	21
46 - 1430	Винт-заглушка Friadent MP D 3.4	46
46 - 1440	Винт-заглушка Friadent MP D 3.8	46
46 - 1450	Винт-заглушка Friadent MP D 4.5	46
46 - 1460	Винт-заглушка Friadent MP D 5.5	46
46 - 1605	Длинный винт трансфера Friadent D 3.0	32
46 - 1615	Длинный винт трансфера Friadent MP	36
46 - 1616	Винт для сварочной втулки	58
46 - 1630	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 3.4	36
46 - 1632	Трансфер Friadent базовый D 3.4	31
46 - 1635	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 3.4	36
46 - 1640	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 3.8	36
46 - 1642	Трансфер Friadent базовый D 3.8	31
46 - 1645	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 3.8	36
46 - 1650	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 4.5	36
46 - 1652	Трансфер Friadent базовый D 4.5	31
46 - 1655	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 4.5	36
46 - 1660	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 5.5	36

Арт.	Название	Стр.
46 - 1662	Трансфер Friadent базовый D 5.5	31
46 - 1665	Трансфер Friadent МР для закр. ложки D 5.5	36
46 - 1730	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.4 / овальный	25
46 - 1740	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.8 / овальный	25
46 - 1745	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.8 / треугольный	25
46 - 1750	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 4.5 / овальный	25
46 - 1755	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 4.5 / треугольный	25
46 - 1760	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 5.5 / овальный	25
46 - 1765	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 5.5 / треугольный	25
46 - 2121	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 1 прямой / A O	38
46 - 2122	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 2 прямой / A O	38
46 - 2123	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 3 прямой / A O	38
46 - 2125	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 5 прямой / A O	38
46 - 2131	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 1 прямой / A O	38
46 - 2132	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 2 прямой / A O	38
46 - 2133	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 3 прямой / A O	38
46 - 2135	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 5 прямой / A O	38
46 - 2141	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 1 прямой / A O	38
46 - 2142	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 2 прямой / A O	38
46 - 2143	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 3 прямой / A O	38
46 - 2145	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 5 прямой / A O	38
46 - 2151	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 1 прямой / A O	38
46 - 2152	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 2 прямой / A O	38
46 - 2153	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 3 прямой / A O	38
46 - 2155	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 5 прямой / A O	38
46 - 2161	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 1 прямой / A O	38
46 - 2162	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 2 прямой / A O	38

46 - 2163	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 3 прямой / A O	38
46 - 2165	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 5 прямой / A O	38
46 - 2221	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 1 угловой / A 15	39
46 - 2222	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 2 угловой / A 15	39
46 - 2223	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 3 угловой / A 15	39
46 - 2225	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 5 угловой / A 15	39
46 - 2231	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 1 угловой / A 15	39
46 - 2232	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 2 угловой / A 15	39
46 - 2233	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 3 угловой / A 15	39
46 - 2235	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 5 угловой / A 15	39
46 - 2241	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 1 угловой / A 15	39
46 - 2242	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 2 угловой / A 15	39
46 - 2243	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 3 угловой / A 15	39
46 - 2245	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 5 угловой / A 15	39
46 - 2251	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 1 угловой / A 15	39
46 - 2252	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 2 угловой / A 15	39
46 - 2253	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 3 угловой / A 15	39
46 - 2255	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 5 угловой / A 15	39
46 - 2261	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 1 угловой / A 15	39
46 - 2262	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 2 угловой / A 15	39
46 - 2263	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 3 угловой / A 15	39
46 - 2265	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 5 угловой / A 15	39
46 - 2331	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 1 прямой / A O	40
46 - 2332	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 2 прямой / A O	40
46 - 2333	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 3 прямой / A O	40
46 - 2335	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 5 прямой / A O	40

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
46 – 2431	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 1 угловой / A 15	40
46 – 2432	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 2 угловой / A 15	40
46 – 2433	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 3 угловой / A 15	40
46 – 2435	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 5 угловой / A 15	40
46 – 2831	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 1	45
46 – 2832	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 2	45
46 – 2833	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 3	45
46 – 2835	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 5	45
46 – 2841	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 1	45
46 – 2842	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 2	45
46 – 2843	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 3	45
46 – 2845	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 5	45
46 – 2849	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 9	45
46 – 2851	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 1	45
46 – 2852	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 2	45
46 – 2853	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 3	45
46 – 2855	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 5	45
46 – 2859	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 9	45
46 – 2861	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 1	45
46 – 2862	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 2	45
46 – 2863	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 3	45
46 – 2865	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 5	45
46 – 2921	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 1	46
46 – 2922	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 2	46
46 – 2923	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 3	46
46 – 2925	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 5	46
46 – 2932	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 2, угловой / A 15	47
46 – 2933	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 3, угловой / A 15	47
46 – 2935	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 5, угловой / A 15	47
46 – 2942	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 2, угловой / A 15	47
46 – 2943	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 3, угловой / A 15	47
46 – 2945	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 5, угловой / A 15	47
46 – 3032	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 2, угловой / A 30	47
46 – 3033	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 3, угловой / A 30	47

Арт.	Название	Стр.
46 – 3042	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 2, угловой / A 30	47
46 – 3043	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 3, угловой / A 30	47
46 – 3100	Платформа абатмента Xive MP	47
46 – 3130	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 3.4	50
46 – 3140	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 3.8	50
46 – 3150	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 4.5	50
46 – 3160	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 5.5	50
46 – 3230	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 3.4	50
46 – 3240	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 3.8	50
46 – 3250	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 4.5	50
46 – 3260	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 5.5	50
46 – 4030	Аналог Friadent MP D 3.4	37
46 – 4040	Аналог Friadent MP D 3.8	37
46 – 4050	Аналог Friadent MP D 4.5	37
46 – 4060	Аналог Friadent MP D 5.5	37
46 – 4200	Винт Friadent MP для колпачка D 3.4 – D 5.5	51
46 – 4300	Винт Friadent MP для отливаемой втулки D 3.4 – D 5.5	48
46 – 4301	Винт Xive MP длинный D 3.4 – D 5.5	50
46 – 4304	Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0	40
46 – 4305	Винт Friadent для EstheticBase D 3.4 – D 5.5	40
46 – 4401	Стандартный горизонтальный винт Friadent	40
46 – 4402	Длинный горизонтальный винт Friadent	40
46 – 4403	Набор со стандартным горизонтальным винтом Friadent	40
46 – 4404	Набор с длинным горизонтальным винтом Friadent	40
46 – 4405	Стандартный трансверсальный винт Friadent	40
46 – 4406	Длинный трансверсальный винт Friadent	40
46 – 4407	Набор со стандартным трансверсальным винтом Friadent	40
46 – 4408	Набор с длинным трансверсальным винтом Friadent	40
46 – 5610	Насадка для ключа-трещотки Friadent для винта MP	95
46 – 5615	Машинная отвертка Friadent для винта MP (для углового наконечника)	95
46 – 5710	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 0,9 мм / короткая	94
46 – 5711	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 1,22 мм / короткая	94
46 – 5712	Машинная шлицевая отвертка Friadent ширина шлица 2,0 мм / короткая	94
46 – 5720	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 0,9 мм / длинная	94

Арт.	Название	Стр.
46 - 5721	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 1,22 мм / длинная	94
46 - 5722	Машинная шлицевая отвертка Friadent ширина шлица 2,0 мм / длинная	94
46 - 5750	Ручка Friadent для машинной шестигранной отвертки	94
46 - 5880	Ручной имплантовод Friadent, длинный	82
46 - 7000	Малый ортопедический набор Friadent	91
46 - 7001	Малый ортопедический набор Friadent (пустой)	91
46 - 8123	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 3	28
46 - 8125	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 5	28
46 - 8130	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 3.4	35
46 - 8133	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 3	28
46 - 8135	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 5	28
46 - 8140	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 3.8	35
46 - 8143	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 3	28
46 - 8145	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 5	28
46 - 8150	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 4.5	35
46 - 8153	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 3	28
46 - 8155	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 5	28
46 - 8160	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 5.5	35
46 - 8163	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 3	28
46 - 8165	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 5	28
46 - 8223	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 3	27
46 - 8225	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 5	27
46 - 8230	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 3.4	35
46 - 8233	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 3	27
46 - 8235	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 5	27
46 - 8240	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 3.8	35
46 - 8243	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 3	27

Арт.	Название	Стр.
46 - 8245	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 5	27
46 - 8250	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 4.5	35
46 - 8253	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 3	27
46 - 8255	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 5	27
46 - 8260	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 5.5	35
46 - 8263	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 3	27
46 - 8265	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 5	27
46 - 9530	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 3.4	48
46 - 9540	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 3.8	48
46 - 9550	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 4.5	48
46 - 9560	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 5.5	48
46 - 9630	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 3.4	51
46 - 9637	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 3.4	52
46 - 9638	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 3.4	53
46 - 9640	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 3.8	51
46 - 9647	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 3.8	52
46 - 9648	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 3.8	53
46 - 9650	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 4.5	51
46 - 9657	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 4.5	52
46 - 9658	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 4.5	53
46 - 9660	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 5.5	51
46 - 9667	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 5.5	52
46 - 9668	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 5.5	53
46 - 9930	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 3.4	49
46 - 9940	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 3.8	49
46 - 9950	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 4.5	49

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
46 – 9960	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 5.5	49
47 – 1141	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, нейтральный, прямой / A O	41
47 – 1142	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, нейтральный, прямой / A O	41
47 – 1151	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, нейтральный, прямой / A O	41
47 – 1152	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, нейтральный, прямой / A O	41
47 – 1241	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1242	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1251	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1252	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 2141	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, дентин, прямой / A O	41
47 – 2142	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, дентин, прямой / A O	41
47 – 2151	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, дентин, прямой / A O	41
47 – 2152	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, дентин, прямой / A O	41
47 – 2241	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2242	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2251	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2252	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, дентин, угловой / A 15	41
47 – 3012	Титановая проволока Friadent 1.2 / L 100, класс 2	59
47 – 3013	Титановая проволока Friadent 1.5 / L 150, класс 2	59
47 – 3014	Титановая проволока Friadent 2.0 / L 150, класс 2	59
47 – 4710	Сварочный аппарат WeldOne	59
49 – 1211	Рентгеноконтрастные шарики Friadent	65
90 – 5005	Универсальный шланг системы охлаждения Frios ISU	90
90 – 5030	Прямой наконечник Frios	89
90 – 5042	Ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1	80
90 – 5043	Длинная внутренняя ирригационная трубка (для удлинителя)	80
90 – 5050	Угловой наконечник Frios	89
90 – 6410	Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S	90

Арт.	Название	Стр.
90 – 6420	Ножная педаль физиодиспенсера Frios S	90
90 – 6440	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м)	90
90 – 6441	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м)	90
90 – 6442	Стерильная защитная пленка для физиодиспенсеров Frios S, Frios E	90
90 – 6443	Набор фиксаторов трубок для физиодиспенсера Frios S	90
90 – 6446	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S/i	90
90 – 6542	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios E	90
90 – 6600	Физиодиспенсер Frios S/i 220-240 В перем. тока	89
90 – 6605	Физиодиспенсер Frios S/i 100-130 В перем. тока	89
90 – 6620	Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S/i	90
90 – 6630	Ножная педаль Frios S/i	90
90 – 6710	Угловой наконечник Frios WI-75	89
90 – 6720	Угловой наконечник Frios WS-75	89
90 – 6810	Угловой наконечник Frios WI-75 LED G	89
90 – 6850	Прямой наконечник Frios SI-11 LED G	89
91 – 0003	Удлинитель сверла Friadent	80
91 – 4502	Пин для примерочной втулки FRIADENT	64

На некоторых рынках данные изделия могут быть не согласованы с регулирующими органами / отсутствовать в продаже / не иметь лицензии. За информацией о текущем ассортименте и наличии изделий обращайтесь в местный отдел сбыта компании Dentsply Sirona Implants. Для улучшения читаемости документа компания Dentsply Sirona Implants не использует символы ® и ™ в основном тексте. Тем не менее компания Dentsply Sirona Implants не отказывается от своих прав на товарные знаки, и данный документ не может быть истолкован иначе. Обратите внимание на то, что показанные в каталоге продукции размеры могут отличаться от оригинальных из-за особенностей печати.

Маркировка материалов

Информация о материалах, используемых в имплантатах, компонентах систем и инструментах приводится с помощью символа сноски, указываемого после каждого элемента: Формирователь десны Friadent². На стр. 99 каталога приведено описание используемых материалов и их составов. Изображения в данном каталоге служат только в качестве иллюстраций. Размеры изображенных изделий могут отличаться от размеров оригинальных изделий. Компания Dentsply Sirona Implants оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

О компании Dentsply Sirona Implants

Компания Dentsply Sirona Implants предлагает широчайший ассортимент решений для всех этапов лечения с помощью имплантатов, в том числе системы имплантатов Ankylos®, Astra Tech Implant System® и Xive®, цифровые технологии, такие как Atlantis® — высокоиндивидуализированные CAD/CAM-решения — и навигационная хирургия Siplant®, решения по восстановительному лечению Symbios® и программы повышения квалификации и развития бизнеса, такие как STEPPS™. Dentsply Sirona Implants — надежный партнер специалистов в области стоматологии, дающий возможность добиваться предсказуемых и долговечных результатов дентальной имплантации и улучшать качество жизни пациентов.

О компании Dentsply Sirona

Dentsply Sirona — крупнейший мировой производитель профессиональных стоматологических материалов и технологий, который уже более 130 лет внедряет инновации и оказывает услуги стоматологам и пациентам по всему миру. Dentsply Sirona разрабатывает, производит и продает полную линейку решений, включая стоматологическую продукцию и продукцию для гигиены полости рта, а также другие расходные медицинские устройства из обширного ассортимента брендов мирового уровня. Изделия Dentsply Sirona под маркой The Dental Solutions Company™ — это инновационные эффективные решения для более качественного, безопасного и быстрого лечения зубов. Общемировая штаб-квартира Dentsply Sirona находится в Йорке (Пенсильвания, США), а международная штаб-квартира — в Зальцбурге (Австрия). Акции компании представлены на американской бирже NASDAQ под кодом XRAY.

Дополнительную информацию о компании Dentsply Sirona и ее продукции см. на сайте www.dentsplysirona.com.